



MADE IN JAPAN,DAISEN

この製品は、日本国内の弊社工場にて、企画・開発・設計から組立て及び品質保証まで全てを行っております。



AIハイブリッドメカが、人間対決で勝利！

家庭用医療機器

LUPINUS ROBO

使用目的又は効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人◎施術部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やベットの周囲(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上ののせたり、座らせたりしないでください。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためみ玉が止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり身体を浮かせ気味にしてご使用ください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

■ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。●本機付属のタブレットに「指圧」の文言を使用しておりますが、使用目的又は効果に指圧の代用は含まれておりません。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



https://www.family-chair.co.jp

製品に関するお問い合わせ窓口 0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口 0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00~17:00

本社:大阪府大阪市淀川区宮原四丁目2番10号 PMO EX 新大阪 6階 製造販売元:ファミリーナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(大山工場)



お問い合わせ

お問い合わせフォーム

※このカタログの内容は2022年11月現在のものです。

221107B078



動画でもご覧いただけます。

Philosophy

ファミリーイナダの哲学


私たちファミリーイナダはマッサージチェアを、「日本が生んだ唯一の文化的な健康製品」と位置付け、1962年の創業以来、「一家に1台使っていただける、価値のある魅力的なマッサージチェアづくり」を目標に掲げ、革新的な製品の創造を通じて、日本のマッサージチェア業界をこれまで長年にわたって牽引してきました。マッサージチェアの歴史を紐解いてみると、世の中に初めて登場した当時は、お風呂屋さんでコインを入れながらマッサージを楽しむという娯楽的な製品でした。その後、1972年にマッサージチェアがあんま・マッサージを代用する家庭用医療機器として初めて厚生省（現・厚生労働省）の認可を得て、国が認めた医療機器としてのポジションを獲得しました。その後も研究開発を積み重ね、2000年には、身体のコリや疲れを一時的に和らげるマッサージチェアからコリや疲れの溜まらない身体

づくりをサポートするメディカルチェアへと進化させることに成功しました。さらに、2016年には、業界初となる「人工知能メカ」を搭載させ、常に化する身体の状態に合わせたもみ方を実現させました。そして、創業から56年目の2018年。私たちは、人工知能と人間の手の動き、すなわち指の関節を含めた人間の手を創り、一人ひとりの身体の状態に合わせたマッサージを可能にした「ルピナスロボ」をついに完成させ、家庭用の必需品に結びつけることができました。私たちが作り上げた「ルピナスロボ」の手は、その上手なマッサージ師のテクニックを、AIの学習機能により取り入れることでプロのマッサージ師の手に勝るマッサージ技法を作り上げました。この「ルピナスロボ」をご体感いただき、本当に気持ちいいマッサージをご家族の皆様味わっていただきたいと

私たちは願っております。東洋医学に基づき人間の365の指圧点を刺激することによって、疲労回復や筋肉の疲れをとる、血行をよくするなど健康増進を手助けします。その治療点を見出し、専門医と共同でマッサージコースを作成することで、より効果を高めているのです。そして、人間の手を超えるマッサージのみならず、ストレッチ、姿勢調整、音楽や語りによるリラクゼーションまで、心身のケアがこの1台で受けられるのも、これまで存在したマッサージチェアとの大きな違いです。予防医学の時代といわれる現代、求められるのは単にコリをほぐすマッサージチェアから、家族一人ひとりの心身の健康づくりをきめ細かくサポートできる価値ある健康必需品へ。健やかな明日のための新習慣を、「ルピナスロボ」と過ごす新しい価値を、ファミリーイナダが自信を持ってご提

案します。私たちはこの「ルピナスロボ」を世界中のご家庭で当たり前存在するものとして、広く普及することを強く願っています。

稲田 二千武

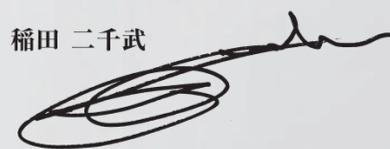

ファミリーイナダ株式会社
代表取締役会長兼社長



ファミリーチェア
ハンドル操作によって、もみ玉の上げ下げを自由に調節。一定スピードでもむ標準型。

メディカルチェアi.1 (アイワン)
コリや疲れの溜まらない身体づくりを目的に、光センサーによる指圧ポイント自動検索システムをはじめ3つのメカニズムによるメディカルマッサージを実現しました。

ファミリーメディカルチェア スマート
業界初となる「人工知能メカ」を搭載。マッサージを受ける人のその時々々の身体の状態や部位に合わせて、本当に気持ちいいマッサージが可能になりました。


ルピナスロボを新しい生活習慣に。

仕事でお疲れのお父さん、家事で大忙しのお母さん、勉強や部活で大変な子どもたち……。そんな何かと疲れやすい現代人の健康必需品として、ルピナスロボは誕生しました。

- 姿勢を調整し全身の骨格の歪みを改善する
- リンパの流れを良くし不要な老廃物を排出する
- 精神的にリフレッシュしたり、心身を平穏に保つ

それが健康の原点です。そのためには、寝る前に歯を磨くのと同じように、その日の身体の歪みやストレスはその日のうちに正しましょう。心身ともに元気よく明日を迎えるため、「今日の疲労、きちんと取った？」をご家族の合言葉に、「ルピナスロボでくつろぐ」という新しい習慣づけを。ファミリーイナダから新しい暮らしのご提案です。



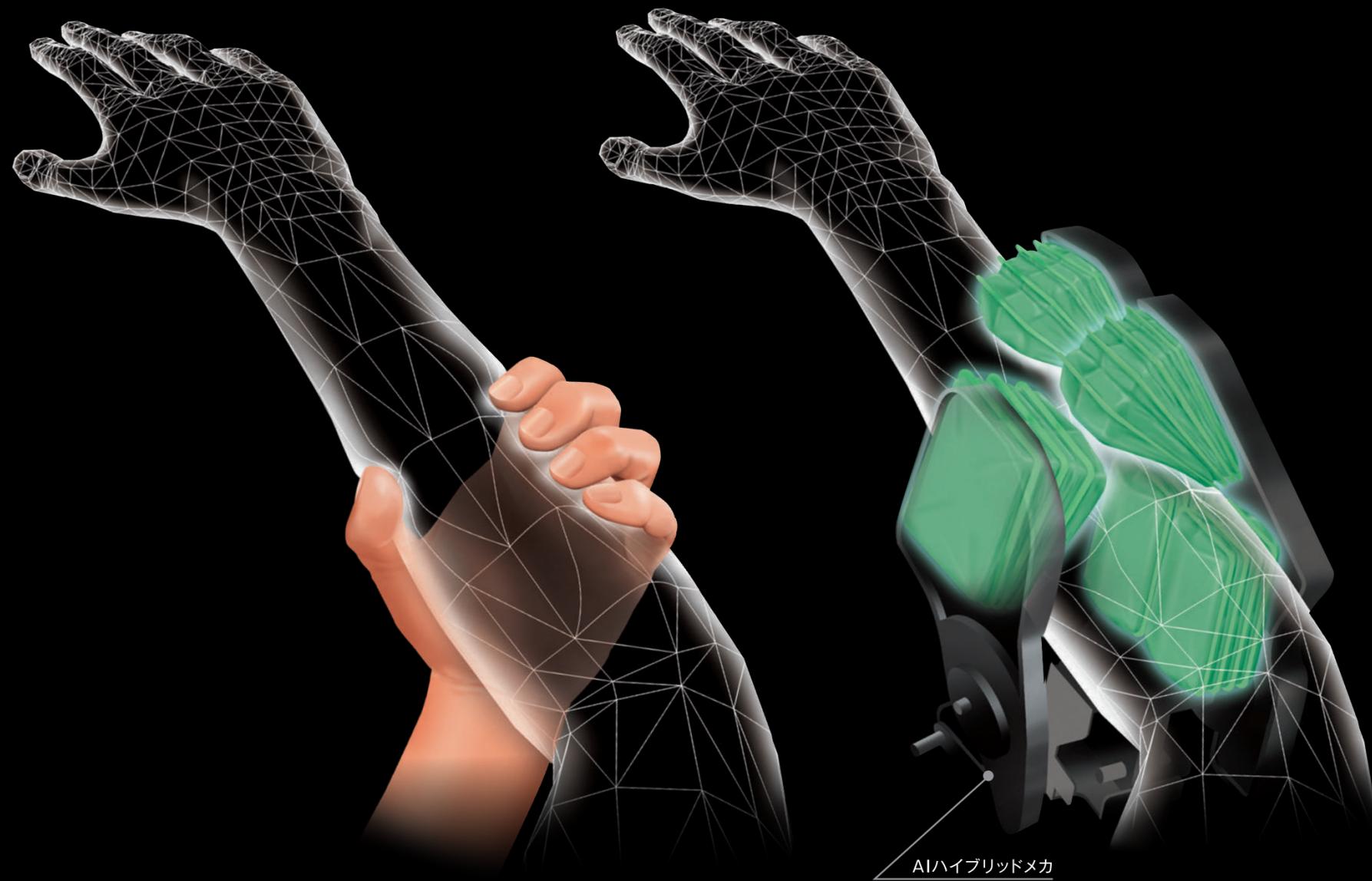

指の第二関節まで持ったメカとAIのハイブリッドで、 人の手を超える“もみ心地”を実現。

マッサージチェアの究極は、プロのマッサージ師の手技に追いつき、追いこすこと。そのためには、人間の手の動きを再現して、人間のマッサージ技法を超えなければなりません。ファミリーナダは「人間の手でもむ以上のもみ心地」を追い求めて、まずは、人間に学ぶことからスタートし、人間の手の動きを研究し続けた結果、ついに指の第一関節と第二関節を有したメカの開発に成功しました。次に求められるのが、動きのリズム。プロのマッサージ師が施術する場合、筋肉の硬さや体格の違いによって同じリズムではなく、筋肉の硬い人に対し

では、ただ強くもむのではなく深くゆっくりもみ、筋肉が柔らかくなると今度はリズムカルな動きへと変化させます。プロのマッサージ師でも、上手な人と下手な人がいますが、それはテクニックの違いです。人間は知能によって手の動きをコントロールすることができますが、マッサージロボがこのような動きをマスターするために、「手を再現したメカ」と「AI」のハイブリッドで、プロのマッサージ師が施術するかのような微妙な動きを再現し、本当に人がもむような心地よさ、気持ちよさを実現することができたのです。

AIハイブリッドメカ

家庭用医療機器

LUPINUS ROBO



AIハイブリッドメカが、人間対決で勝利！



「人間の手を超える」という思いから誕生した、ルピナスロボ。長年、マッサージの仕事を生業とされているプロの手技にAIハイブリッドメカが真摯に挑んだ結果、見事勝利することができました。しかし、ルピナスロボを開発したの

は、人間に勝つことが第一ではありません。プロのマッサージ師の方々と共に、人々の健康づくりのために尽くすことが、何よりの目的です。

「マッサージに関する調査」を20代～70代の男女616名に実施し、その中から30名を抽出してマッサージ師とルピナスロボの施術のどちらがより気持ちいいかという定性調査を行いました。各15分の施術を受けていただいた後、首・肩、腰、腕、足裏・ふくらはぎの各部位と、利便性等も加味した総合評価をそれぞれ持ち点100点として、お答えいただきました。*「足裏・ふくらはぎ」については、マッサージ師による足裏施術のなかった3名を除く平均値

勝利した3つの理由

①「AIハイブリッドメカ」 ②「人工知能分析」 ③「体型認識機能」

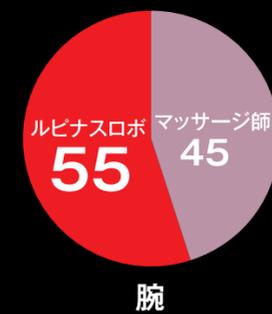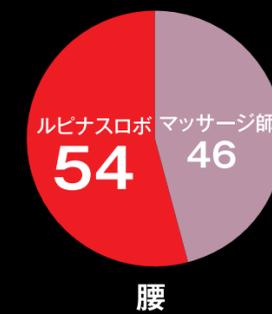

*2018年10月22日 当社と株式会社シングル調べ。

AIハイブリッドメカで、
気持ちよさの真髄へ。




AIが筋肉の疲労による硬さを検知し、体調に合わせてマッサージします。



マッサージを受ける人の筋肉の形や大きさ、その時のコリに合わせて人工知能メカが最適な強さと時間にもみ動作を調整。マッサージ中のもみ玉から受け取った負荷に応じて、もみ玉の動く速さを調節し、凝っている部分は深くゆっくり、コリがほぐれてくるとリズムカルに施術します。



グッと押して ググ〜ッと押し込み クツと止まり スウ〜ッと抜く

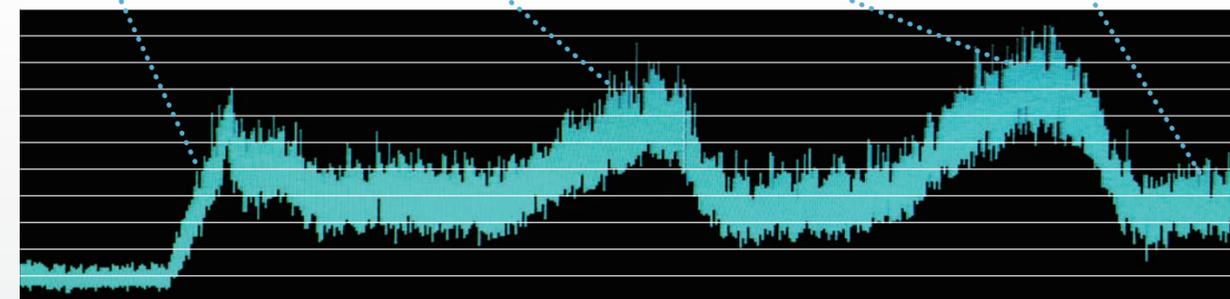


*人工知能メカのプロのもみ味をオシロスコープで測定したイメージ図



本体に座るだけで、家族の指圧点を自動的に検索。

「アジャストセンサー指圧点自動検索システム」が、身長や体型などの個人差に関わらず、家族一人ひとりの全身の指圧点を自動的に検出。「ルピナスロボ」に座った方の体型を知り尽くしたうえで、的確なポイントでもみ動作が行われるようにもみ玉の位置を調節します。

- 全身の指圧点を自動検出
- 骨格を検知
- 筋肉の形や大きさを検知

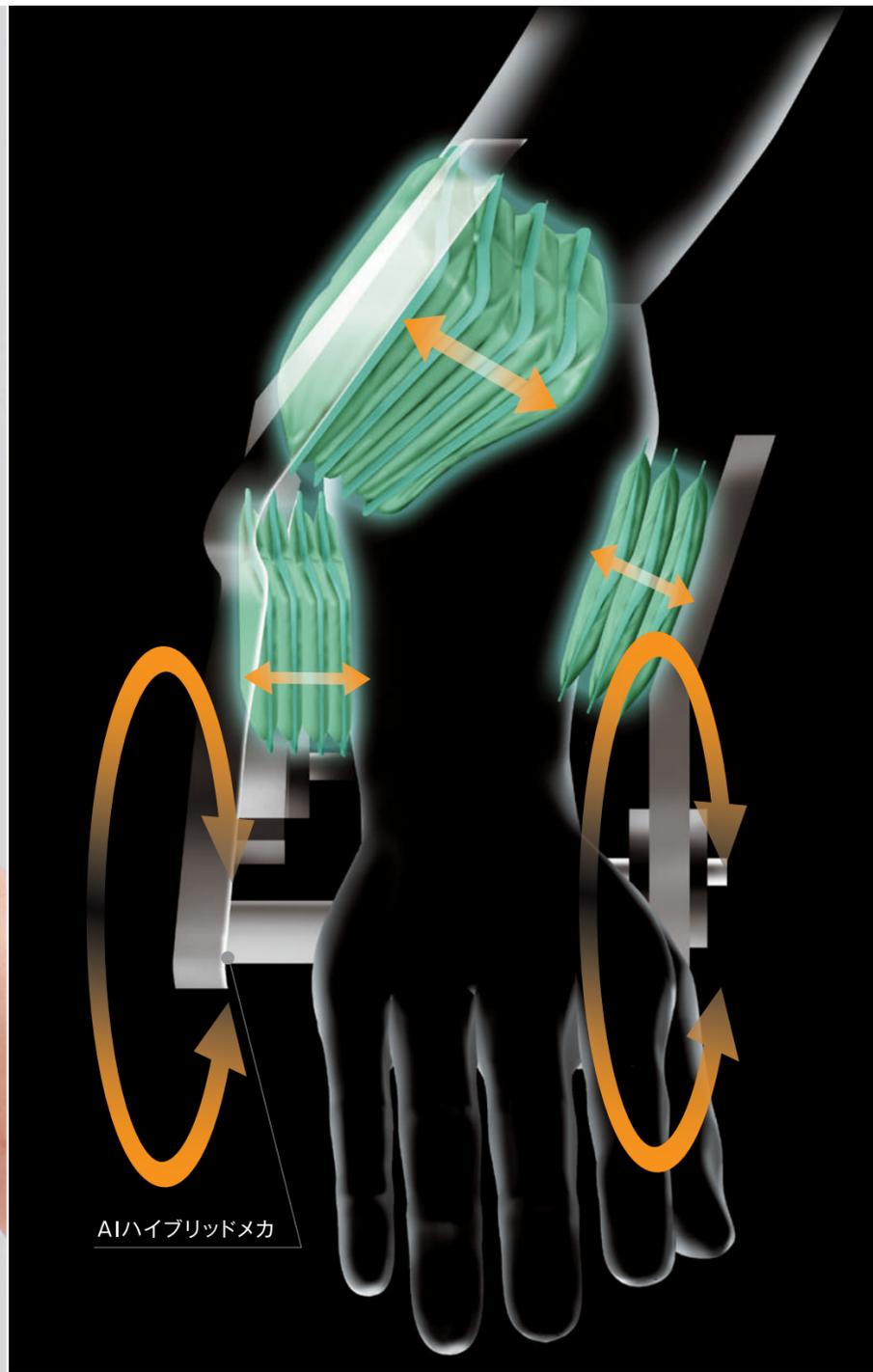

はあくじゅうねつ
把握揉捏つかみもみ

エアセルが前腕部をやさしくホールドし、腕全体のコリをほぐします。

人の手でもむように、3次元の動きでマッサージ。

指の第二関節まであるメカとAIの組み合わせによって、3次元の動きが可能に。AIハイブリッドメカによる「つかみもみ」で腕全体を施術し、まるで人の手でもまれているかのような心地よさが体感できます。



身長差に関係なく指圧点を施術できるように、最大約**17cm**のストロークでメカが移動します。




胸おさえ肩上もみ

コリが溜まりやすい肩甲骨周りの筋肉を、肩甲骨に沿って斜めに動くことで、丹念に深くもみ込んでいきます。

肩をしっかり押さえて、メカが指圧点を効果的に刺激。

マッサージ師が施術する際に肩を押さえて行うのと同様、エアーの力で従来の横方向に加えて、独自の技術で前方からも肩口をホールドしたうえで正しく指圧点を刺激できるように、メカユニットが後ろからぐっと押し込みます。

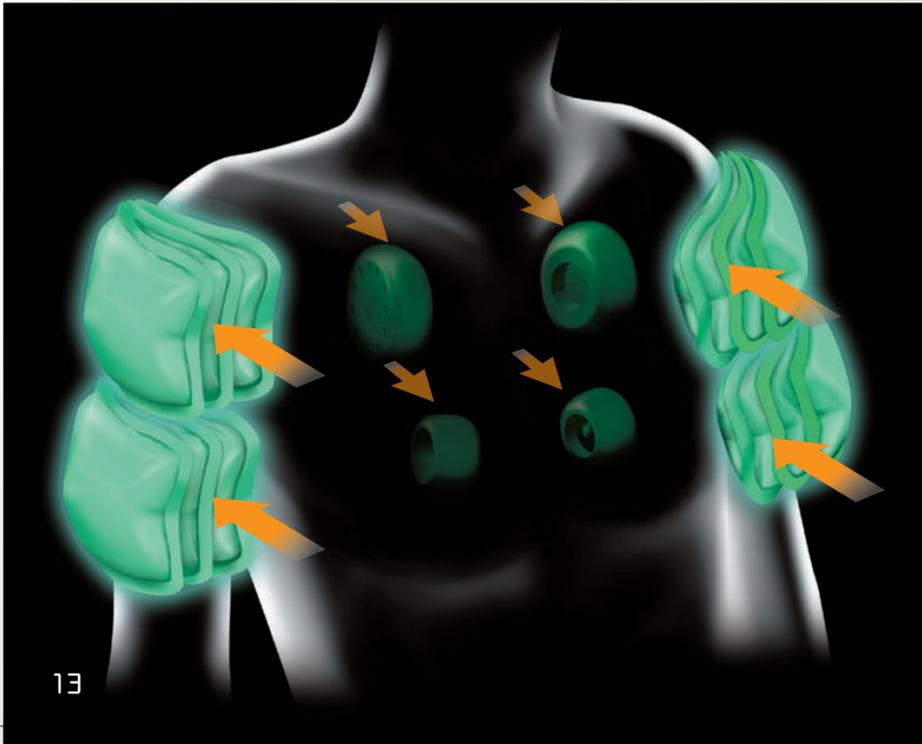

首深層指圧もみ


首のつけ根をしっかりとらえて、指圧感覚でグイグイとこねるようにもみます。首すじをもみほぐし、頭を傾けるように首すじを伸ばします。




**マッサージコースを選ぶと
もんで欲しくない場所を選べます。
(首・肩・肩甲骨・腰・腕・ふくらはぎ・足裏)**

今までマッサージを受けて、もんで欲しくないと感じた場所はありませんか？
けがなどでマッサージをして欲しくない場所はありませんか？ルビナス
ロボは、もんで欲しくない場所に配慮してマッサージを行います。
注) 選択した部位が全くあたらないということではありません。



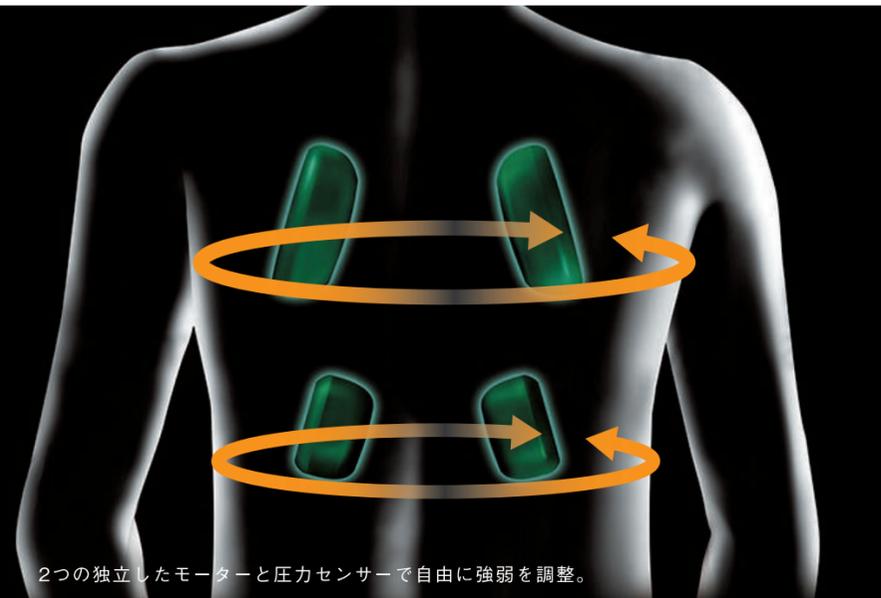

2つの独立したモーターと圧力センサーで自由に強弱を調整。

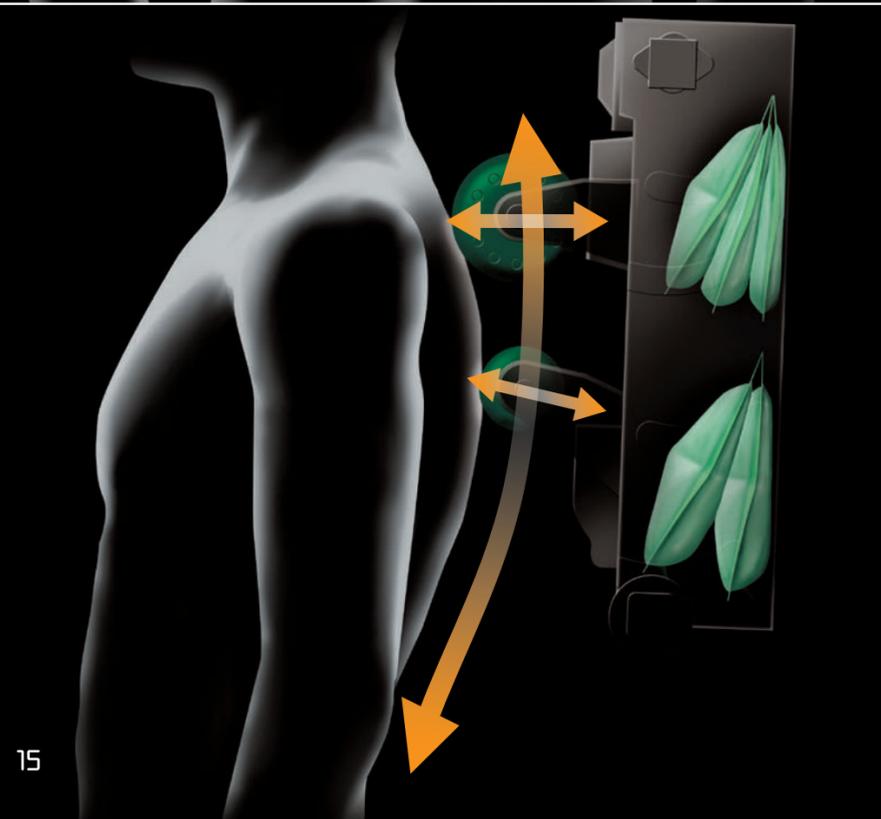

上下独立輪状深もみ

上下メカが独立して動き、背中下部から上部までを、部分ごとに丁寧にマッサージ。ねばりのあるもみ味で背中のコリをやわらげます。

AIハイブリッドダブルメカ+圧力センサーで、お好みの強さに。

独立したモーターと強弱機構を搭載したAIハイブリッドダブルメカには、エアセルの裏に圧力センサーも搭載しているため、部分的に強く押ししたりなど、より個人の体型や好みに合わせた力加減でマッサージを行えるようになりました。

左右独立おさえもみ


ハムストリング(大腿二頭筋、半膜様筋、半腱様筋など)を二指把握揉捏でつかむようにもみほぐします。


だいでんきん 大臀筋圧迫もみ

臀部付近まで深く届くもみ玉が、大臀筋や座骨神経に近い梨状筋をもみほぐします。

おしりの背面は人工知能メカで、太ももはエアーで施術。

立体的に骨盤やおしり周りをもむことで、太もも外側の筋肉や内もものリンパ節をほぐします。座面に配置されたエアセルとふくらはぎのエアセルが連動して、ひざ裏を伸ばすように太ももの裏を押し上げてストレッチも行います。

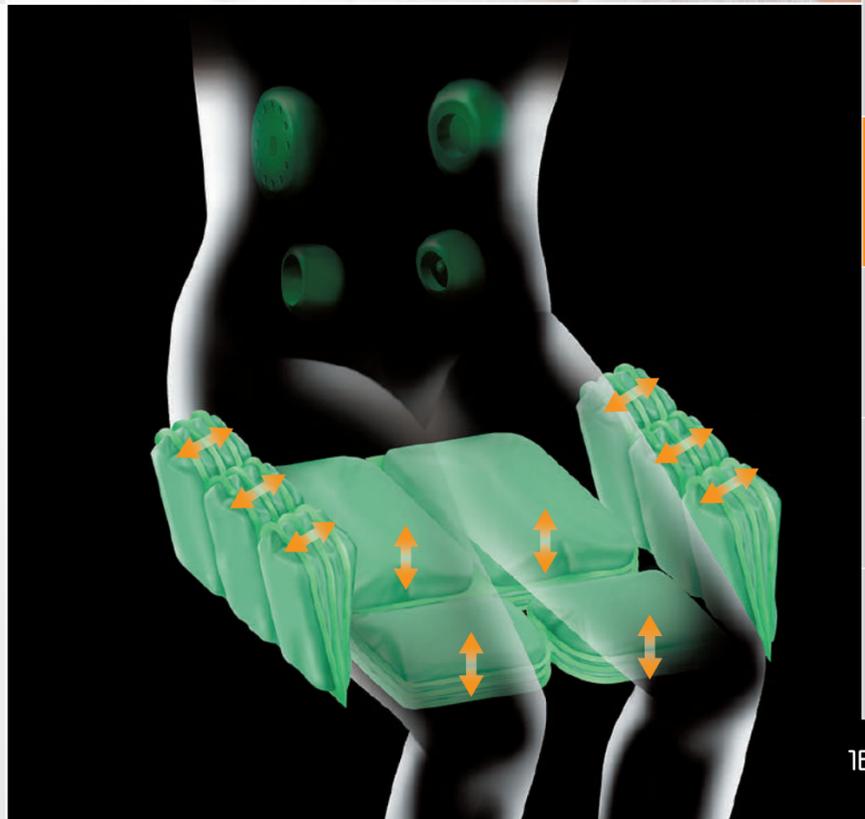

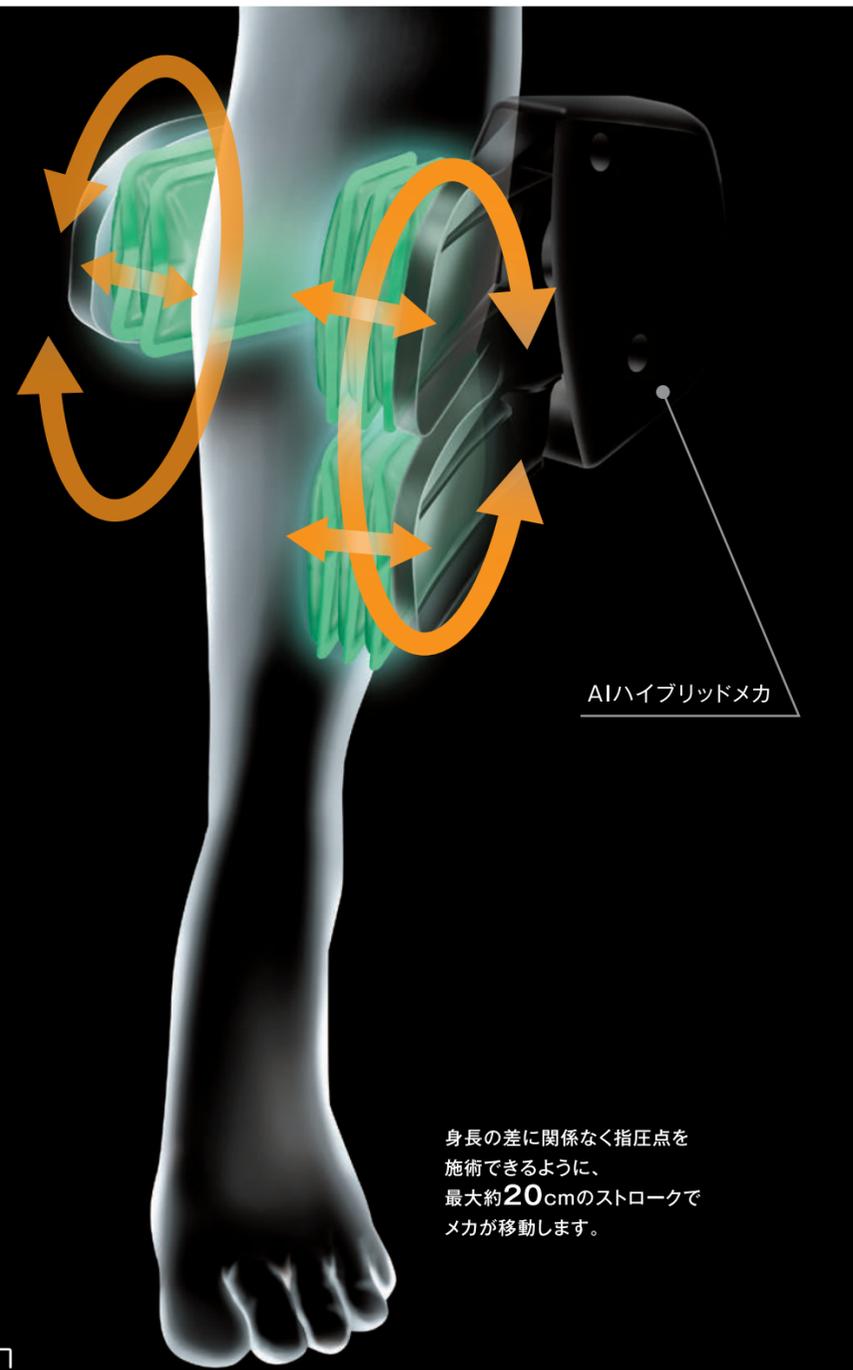

身長の差に関係なく指圧点を
施術できるように、
最大約20cmのストロークで
メカが移動します。



はあくじゅうねつ
把握揉捏つかみもみ

ふくらはぎを大きくつかむようにもむとともに、上下に動きながら、ふくらはぎ全体のコリをほぐします。

主要な指圧点を狙って、最適なポジションにメカが移動。


メカが主要な指圧点をピンポイントで狙えるよう自動的に移動してマッサージ。AIハイブリッドメカが人間の手のように上下・左右・前後に動き、メカの軌道でマッサージ師が施術時に行っているもみ方を再現します。

足裏深層3D指圧もみ


足先をつかむようにもみほぐします。さらに、事前に登録した足のサイズに合わせて、もみ玉が上下に動きながら、足裏をグリグリともみほぐします。

足全体を動かないように、しっかりホールド。

指圧点にフィットするように、もみ玉が足裏を指圧しながら内回り・外回りに移動。プロのマッサージ師が施術する際と同じようにエアで足が動かないように押さえ込み、パワーを分散させることなく足裏を指圧します。

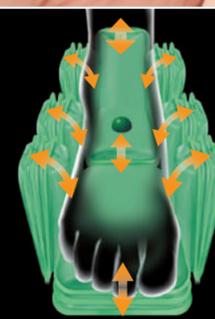

複数のエアともみ玉の連携で複雑な調整が可能。

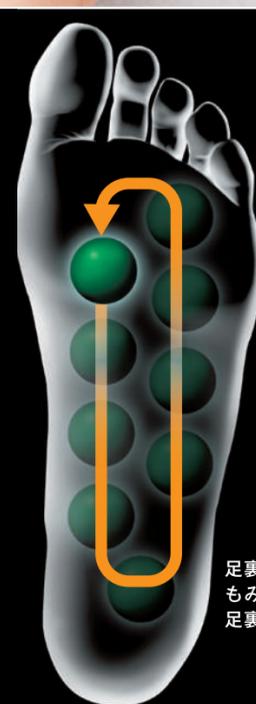

足裏を固定し、もみ玉が指圧しながら、足裏全体をもみほぐします。

ヨガのゆったりした動きと呼吸で、柔軟性や筋力、バランス力を整えます。

ゆかり先生ヨガ

身体が硬くなると、将来転倒しやすくなるなどのリスクが高くなるため、柔軟な身体作りは大切です。美容ヨガのポイントは、呼吸法と正しい姿勢。柔軟性、筋力、バランス力を整えることを中心に、呼吸しながら全身をほぐすことで、普段動かしていない筋肉を動かしたり、関節の可動域を広げて柔らかくしたり、また、全身を動かすことによって血行も良くなります。ヨガのゆったりとした動きと呼吸が、身体の隅々まで新鮮な活力を送ってくれます。



ヨガ世界大会ワールドチャンピオン・ヨガコーディネーター
三和由香利先生

大学卒業後、教職員を経て単身渡米し、ヨガやピラティス資格を取得して2006年より指導開始。2007年から5年連続ヨガの世界大会に日本代表として出場、2011年には日本人初のワールドチャンピオンに。

ヒーターで身体を温めながら、リンパ節周りを集中的にマッサージします。

リンパマッサージ

リンパは静脈にそって流れ、栄養を細胞に運び、体内に蓄積された老廃物や疲労物質を回収しながら流れています。しかし、リンパの流れが滞ると、顔色が悪くなったり、ストレスや疲労が取れなかつたりなどの様々な不具合が起きるため、日常的にもみほぐす必要があります。ひざの裏側、太もものつけ根(鼠径部)、腕、二の腕、鎖骨まわりといったリンパ節周辺を中心に、ヒーターで身体を温めながら、ゆっくりとマッサージを行います。



クリニカルサロンKOMACHI代表・リンパ整体師
小鷲真美先生

漢方医学・東洋医学・食事療法・酵素やサプリメントなど、カラダによいと言われる物を試し、各療法の長所をコラボさせて、独自の治療法を確立。

普段使わずに固くなった筋肉を軽い運動療法で伸ばします。

ストレッチ運動

前屈&反りストレッチ

前屈運動で凝り固まった腰部の筋肉を伸ばしていき、また、全身を反らせて腹部の筋肉を伸ばして、猫背や反り腰といった姿勢不良を改善します。

左右ひねりストレッチ

股関節周りの筋肉の緊張をほぐし、おなか周りの血行改善を促します。また、凝り固まった骨盤を刺激して腰を整えて全身のバランス調整を行います。

伸ばしストレッチ

反りによる伸ばしに加えて、腕・脚を掴んで伸ばす動作も可能になり、腕だけ・脚だけといった特定部位のみのストレッチも行えます。



関西医科大学
木村穰教授

ストレッチは、太ももや背中など大きな筋肉を伸ばすことで、同時に大きな血管も伸ばすことができます。朝晩15分のストレッチを行うことで動脈硬化などにその効果があると期待され、現在、研究が続けられています。

正しい姿勢へと導いたり、集中力の向上をサポートします。

姿勢調整

デスクワークなど長時間同じ姿勢を続けると、筋肉が緊張して固まり、腰痛、肩コリの原因に。また、スマートフォンの画面を長時間のぞきこんでいると、猫背のような悪い姿勢が習慣化します。このような現代人に多くみられる姿勢不良を正していくことを目的に、固まった筋肉をほぐしていきます。



座禅

座禅のポイントは、「姿勢を整えて、呼吸を整えること」です。座禅コースでは、集中力の向上やストレスの軽減、心のリフレッシュを目的に、①背筋を伸ばす②呼吸をゆっくり行うようアナウンスで指示する③瞑想に集中しやすい環境づくりをサポートします。



成長盛りの子どものために、心とカラダのケアが大切です。

子どもコース(中学生~高校生向け)

子どもと成人では、体格はもちろん、骨格の形や筋肉量、さらには有効な指圧点が異なります。ルピナスロボの子どもコースは、体格の違いを認識したうえで指圧点を自動検出し、子ども一人ひとりに的確でソフトなマッサージを行います。*必ず保護者の方が付き添い、ご使用ください。



集中力アップ

ソフトなみ心地のマッサージで血行を促進させて、集中力の高まりをサポート。自宅学習の休憩中にご使用いただくと、疲労回復や心身のリフレッシュにつながります。

ストレッチと疲労回復

疲労回復は、心身の健全な発育のために重要です。運動を行うことと同様、ルピナスロボによるストレッチを日常の生活習慣に取り入れることで、全身のバランスを調整します。

姿勢調整

成人に比べても骨格の強度や筋肉量などに違いがある子どもに対して、背骨を脊柱の一つひとつに対して、ソフトな動きで姿勢を整えていくコースです。



鳥取大学名誉教授 医学博士
井上貴央氏

近頃の子どもは、様々なストレスを受けています。マッサージによって日々のストレスを癒したり、スポーツ後の筋肉をほぐすことによって、快い眠りが得られ、健全な心身の発達につながります。

母の語りや落ち着いた音楽によって、精神的な安定をサポートします。


ミュージアム

母の愛

身体だけでなく心の疲れを取り除くことも日々の健康づくりに必要不可欠で、ストレスと上手につきあうことも心の健康に欠かせない重要な要素です。そこで、音楽と語りによって、お母さんやふるさとのこと、幼少の頃を思い出して心を安らげていただけるようにミュージアムコースをご用意しました。いくつになっても覚えているのが、やさしかった母親の記憶。年齢問わず、母の愛は一生感じるものです。心が落ち着く音楽と共に、リンカーンなど偉人の母による名言をやさしさあふれるナレーションで、心地のいい懐かしの世界へと導きます。

外部音源

タブレットにお手持ちのスマートフォンなどを接続することで、お気に入りの音楽をお楽しみいただけます。

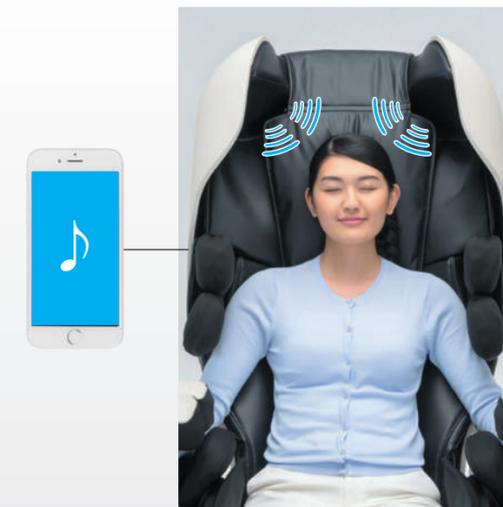

優れた音響効果で臨場感のある音楽が楽しめるバックロードホーンシステムを搭載。

バックロードホーンとは、共鳴管を利用してスピーカーから出る音響エネルギーを増幅する仕組み。スピーカーを4つ搭載し、臨場感あふれる音楽が満喫できます。



ルピナスロボは、シリーズ最多の全27コース*をご用意しています。*2022年11月現在

5年間最新プログラム更新サービスにより、コースは随時無料でアップデートします。

メディカルコース*

- リンパマッサージ ●全身疲労回復
- 求心 ●遠心 ●ストレス解消
- がんこ肩コリ ●ウォーミングアップ
- クールダウン ●むくみ緩和
- マッサージ&ストレッチ

※もんで欲しくない部位の設定が可能です。

バージョンアップ*

- シンクロメディカル
- からだ防衛
- アイケア

※もんで欲しくない部位の設定が可能です。

今日のおすすめコース*

- 本日のおすすめ

※もんで欲しくない部位の設定が可能です。

子どもコース*

- 集中力アップ
- ストレッチと疲労回復
- 音楽とリラクゼーション ●姿勢調整

※もんで欲しくない部位の設定が可能です。

部位集中

- 首 ●肩 ●肩甲骨 ●腰 ●腕
- 座 ●足裏 ●背筋ローラー
- ふくらはぎ

姿勢・座禅

- 姿勢調整 ●座禅

ストレッチ運動・ヨガ

- トータルストレッチ
- 前屈&反りストレッチ
- 左右ひねりストレッチ
- 伸ばしストレッチ
- ゆかり先生ヨガ

ミュージアム

- 母の愛 ●外部音源



お客様情報を登録した後、
わが家仕様のオーダーメイドとしてルピナスロボをお届けします。

まずは、お申し込み時に年齢・性別・身長・体重
などの情報を登録していただきます。

ファミリーイナダは、ルピナスロボを世界に1台しかない、よりパーソナルな
メディカルチェアとしてお使いいただくために、受注生産体制をとっています。
まずは、ルピナスロボのご購入をお申し込みされる際に、お客様のご家族の
氏名、生年月日、性別、身長、体重などのパーソナルデータ登録のための申請を

していただきます。そして、お客様からいただいた個人情報を生産工場にて
データ化して事前にお客様にお届けします。ルピナスロボのお届け後は、面
倒な登録作業なしに一人ひとりに最適なマッサージをお楽しみいただけます。

店頭

ご購入時に、お客様のご家族の氏名、
生年月日、性別、身長、体重などの
パーソナルデータをご提供いただきます。

※登録可能人数は、8名までとなります。



- 名前(ニックネーム) ●生年月日
- 性別 ●身長 ●体重 ●足のサイズ

お客様宅

お手元に届いた時点で、事前に届く
2次元コードを読み込ませるだけで、面倒な
登録作業なしにルピナスロボをお使い
いただけます。



※製品お届け後に
ユーザー情報の追加・
変更も可能です。

顔認証システムを採用しているので、
座るだけで自動的にログインが
完了します。



音声で認識できるシステムを搭載。



ルピナスロボは、5年間の健康サポートがセットになった家庭用医療機器です。

ルピナスロボを通じて、さまざまなサービスで5年間、お客様とご家族に対して責任を持ってサポートさせていただきます。



家庭用医療機器

LUPINUS ROBO

Wi-Fi、LTEとは

Wi-FiとLTEは利用している通信方式が異なりますが、どちらもインターネットに無線で接続する仕組みになっています。マッサージプログラムの更新や各種健康データの確認などでルピナスロボとクラウドをインターネットで接続する際に、Wi-FiまたはLTE環境が必要になります。ご自宅で光インターネット回線をすでにご利用中の方はWi-Fiモデルを、ご利用でない方は手軽に無線インターネット環境を構築できるLTEモデルをおすすめします。



健康サポートサービス

5年間、通信ネットワークを活用した健康サポートサービスに関するご利用は無料です。*1

*1 一部のサービスは有償となります。

*2 一部の消耗品などは有償となります。また、一般家庭でのご使用に限り。業務用は1年保証になります。



最新プログラム更新サービス

5年間、最新のマッサージプログラム・健康サポートプログラムへ随時無料でアップデートいたします。*2



メーカー保証サービス

故障トラブルなど万が一の時も安心。5年間のアフターサービスに対応いたします。*2



ブラック Wi-Fi
FMC-LPN30000 (B)
JANコード:4992648039732

ブラック LTE
FMC-LPN30000 (L-B)
JANコード:4992648039763



アイボリー Wi-Fi
FMC-LPN30000 (IV)
JANコード:4992648039725

アイボリー LTE
FMC-LPN30000 (L-IV)
JANコード:4992648039756

搭載機能	INADA medical AI 全身の指圧点を自動検出 骨格を検知 筋肉の形や大きさを検知 筋肉の疲労による硬さを検知 AIハイブリッドダブルメカ 肩・腰 マルチユニット ふくらはぎ専用 AIハイブリッドメカ (エアセル) 足先専用 AIハイブリッドメカ (エアセル) 腕専用 AIハイブリッドメカ (エアセル) ヒーター (背・かかと) INADA medical NETWORK 毎日座るたびに健康チェック 4チャンネルスピーカーユニット ベストポジション機能 音声認識調整機能 顔認証機能
販売名	ファミリーメディカルチェア FMC-LPN30000
付属品	タブレット (10.1インチ)
もみ幅	最小2cm～最大19.4cm
リクライニング角度	水平面に対して約93°～約153°無段階 (電動リクライニング)
外装布地	合成皮革
音源の外部入力	有
使用電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	270W (ヒーター使用時) ヒーターのみ動作時の定格消費電力38W
重量	約115kg
医療機器認証番号	230AKBZX00048000
医療機器製造販売許可番号	312B2X00003
メーカー保証期間	5年間
寸法	<p>●ご自宅への搬入・設置について</p> <p>*開梱時、アームレスト・フットレスト・タブレット取り外し時</p>

※本体とフットレスト部分は、搬入しやすいように別梱包でお届けします。