

Shoulder PRO

AIイナダチェア ショルダープロ

AIC-P100

このたびは、AIイナダチェアショルダープロをご利用いただき、まことにありがとうございます。
この製品は、疲労の回復を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみいただけます。
皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして
未永くご愛用ください。

取扱説明書

添付文書



もくじ

■安全上のご注意	1
■おもな特長と使用目的または効果	4
■各部の名前とはたらき	5
■ご使用前に	7
■椅子の調節	10
■コースの種類と特長	13
■リモコンの操作方法	14
■使い終わったら	15
■電子決済BOX	16
■Q&A	17
■故障かな?と思ったら	18
■保管とお手入れの仕方	19
■アフターサービスについて	20
■仕様	21
■お問い合わせ窓口	23

- ◎ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎この製品は、日本国内の弊社工場にて企画・開発・設計から最終組み立て、及び品質保証まで全てをおこなっております。

日本国内専用

この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。
PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.

この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。
JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.

Massage
+
Medical



安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5～6ページをご覧ください。（電子決済BOX付きの方は5ページと16ページをご覧ください）

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

表示の種類

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味

 禁止	禁止の行為であることを示しています。
 分解禁止	分解してはいけないことを示しています。
 ぬれた手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。
 禁止	風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。
 強制	行為を強制したり指示したりするものです。
 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
 アース取り付け	アースを取り付けることを示しています。

ご使用場所の注意

 注意	
 禁止	●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
 強制	●床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
 アース取り付け	●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、9ページをご覧ください。
 禁止	●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。

ご使用前の注意点

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●次の方は使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ○医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症〔皮下組織の炎症を含む〕等。○急性の頸椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人 ●電源は交流100V以外では使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →火災や感電の原因になります。 ●変圧器を用いた使用はしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →故障や感電の原因になります。 ●電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいとき等は使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →感電やショート・発火の原因になります。 ●マッサージの前には必ず施療部の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでも勝手に修理などせず、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。施療部の布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●次の方は、使用前に医師に相談してください。 <ul style="list-style-type: none"> ○心臓に障害のある人 ○糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ○骨粗しょう（鬆）症の人や脊椎の骨折、急性[とう（疼）痛性]疾患の人 ○施療部位に創傷のある人 ○体温38℃以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状[けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動等]の強い時期にある人。衰弱している人 ○妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ○ペースメーカー等の電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ○背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ○かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ○悪性の腫瘍のある人 ○安静を必要とする人 ○内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）等の急性症状のある人 ○医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ○リウマチ症、痛風等により関節が変形している人 ○めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ○捻挫、肉離れ等の炎症性の人 ○腱鞘炎、またはそのおそれのある人 ●特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。 ●しばらく使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●この取扱説明書の使用方法以外の使い方をしないでください。また、本体と他の治療器や電気毛布等を併用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。 ●人をのせたまま移動しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →本体の転倒により、事故やケガの原因になります。 ●本体に付属しているもの、または指定しているもの以外は使用しないでください。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> →故障や感電の原因になります。 ●電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。 <ul style="list-style-type: none"> →感電やショート・発火の原因になります。 ●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。 ●安全のために、メカの位置を確認し、収納位置にない場合は、主電源スイッチを入れ、機器が正常に動作することを確認してからゆっくり座ってください。 ●しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。

ご使用時の注意点

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体を脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →コードが破損し、火災や感電の原因になります。 ●本体やリモコンに水等をこぼさないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →感電やショート・発火の原因になります。 ●お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺（背もたれの後ろや座面の下等）で遊ばせたり、本体の上へのせたり、座らせたりしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →事故やケガの原因になります。 ●椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様（乳児等）を抱きかかえてのご使用はおやめください。 <ul style="list-style-type: none"> →事故やケガの原因になります。 ●布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。 <ul style="list-style-type: none"> →事故やケガ・感電の原因になります。修理は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。 ●本体を手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> →感電や故障の原因になります。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。 <ul style="list-style-type: none"> →事故やケガの原因になります。 ●体や物がはさまりこまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。

安全上のご注意

ご使用時の注意点

⚠ 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●素肌では使用しないでください。 ●マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。 →事故やケガの原因になります。 ●頭部、胸部、腹部、関節部（ひじ、ひざ等）には使用しないでください。 →気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋等には柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。 ●もみ玉が上下する部分、リクライニング等の可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、プレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。 ●マッサージチェアを無人で動作させないでください。 →事故やケガの原因になります。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの【急停止】ボタンを押して、動作を停止させてください。 ●使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。 ●はじめは弱い刺激でマッサージしてください。マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。 →はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。 ●マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。 ●マッサージは、1回15分以内にしてください。同一箇所連続して5分以上使用しないでください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりの必要マッサージは、通算30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。 ●落雷の可能性のあるときは、ただちに使用を中止して、主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショート等による火災のおそれがあります。

【安全上のご注意】

ご使用後や使用しないときの注意点

⚠ 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。 ●電源コードは本体以外では使用しないでください。 ●本体を使用後は、必ずリクライニングを完全に起こしてください。 ●コード類は、ねじれをほどいて保管してください。 ●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。 ●本体に物を載せないでください。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。 ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 ●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

その他の注意点

⚠ 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の上に立たないでください。座面以外に座る等して、上から強い衝撃を与えないでください。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に連絡してください。 ●電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に交換の依頼をしてください。 ●機器は改造しないでください。 →火災や感電、ケガの原因になります。

⚠ 注意	
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

お願い

- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

おもな特長と使用目的または効果

特長

INADA medical A.I.

左右独立型人工知能肩メカ

ファミリーイナダ59年の研究開発から生まれた業界初のもみ方を実現する肩メカは、肩の筋繊維に対して垂直にアプローチすることができるので、効率よく肩の筋肉をほぐします。

INADA medical A.I.

アンドロイドメカ

一人ひとりの体型、筋肉の形や大きさ、その時のコリに合わせて、人工知能メカが最適な強さ・最適な時間にもみ動作を調整します。

INADA medical A.I.

肩位置自動検索システム

マッサージ前に、その人の体型に応じて肩位置を自動で検索します。体型や目的に合わせて効果的なマッサージをおこないます。

プロ監修のもみ技を実現！

肩に注目したメディカルコース

プロが肩の施療時に行う手技である把握揉捏（はあくじゅうねつ）法を再現し、その人の肩のコリの状態に合わせたマッサージをおこないます。


使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の緩解
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす

各部の名前とはたらき

本体

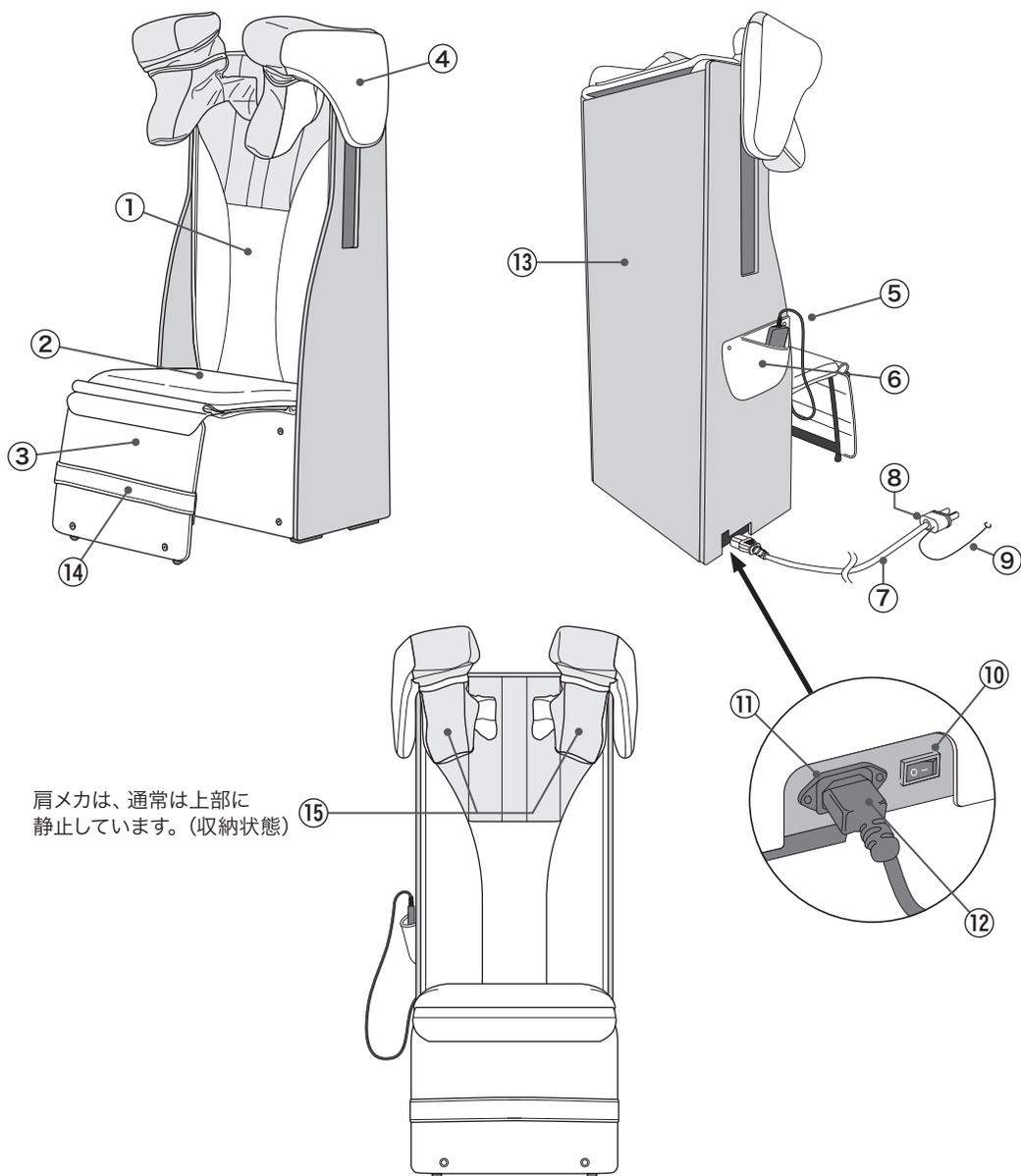


【各部の名前とはたらき】

①	背もたれ (背パッド)
②	座面
③	フットレスト
④	肩メカ
⑤	リモコン
⑥	リモコンポケット (機種によって異なります)
⑦	電源コード
⑧	電源プラグ

⑨	アース線
⑩	主電源スイッチ
⑪	インレット
⑫	コネクタ
⑬	裏カバー
⑭	持ち手 (フットレスト引出用)
⑮	肩メカもみ玉

リモコン

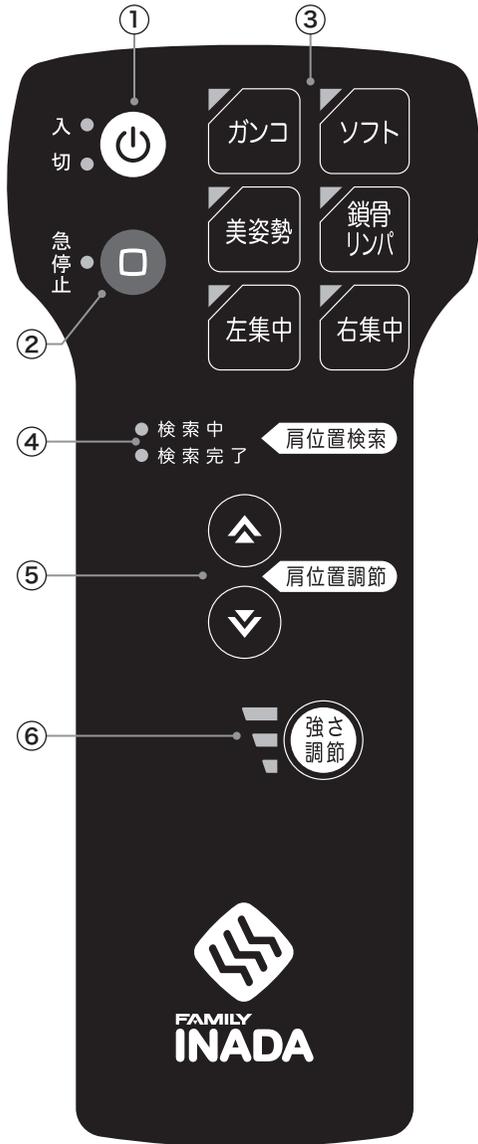

①	入/切ボタン	リモコンの電源の「入」「切」をおこないません。リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色に点灯します。動作中に押すと、もみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。
②	急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。肩メカの回転が停止し、上昇します。急停止中は急停止ボタンのランプが赤色に点滅します。
③	メディカルコースボタン	各ボタンでコースを選択できます。
④	肩位置検索表示ランプ	肩位置の検索中と完了をランプでお知らせします。
⑤	肩位置調節ボタン	肩メカの位置調節に使用します。
⑥	強さ調節ボタン	コース中のもみの強さを調節できます。

※電子決済BOX付きの製品はP16をご確認ください。

【各部の名前とはたらき】

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンに水等をこぼさないでください。 ●ぬれた手で操作しないでください。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの上に座ったり、落としたり、踏んだり、コードを強くひっぱったりしないでください。 ●先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。 →破損の原因になります。


ご使用前に

- この製品は、座面を折りたたんだ状態で梱包してお届けしています。
ご使用前には、必ずフットレストを広げて座面が安定していることを確認してください。
- 冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。
本体を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

同梱物の確認

梱包箱には本体と同梱物が入っていることを確認してください。

本 体

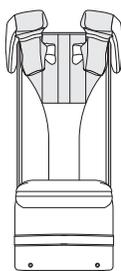


本体


同梱物



取扱説明書 (本誌)

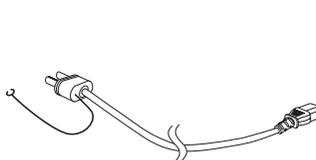


電源コード

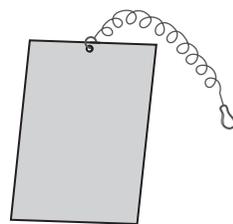

操作ガイド

設置場所について

フットレストを広げたときに物に当たらないように、本体前スペースを約40cm以上確保してください。

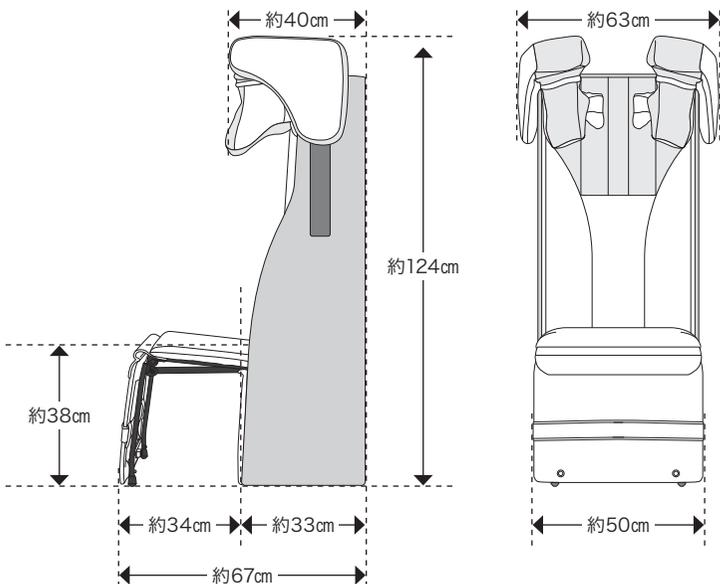

- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。
- 重量物ですので、下ろすときに床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cm²あたり約1.4kgの荷重がかかります。



注意

- 浴室やサウナなど、湿気が多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所 (40℃以上) では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

搬入/移動の仕方

移動の際は、主電源スイッチを切り、電源プラグ及びアース線をコンセントから抜き、電源コードのコネクタもインレットから抜いてください。

本体は、約31kgありますので、十分注意して移動してください。

- 重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、市販の運搬用手袋を装着することをおすすめします。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようにご注意ください。
- 搬入、移動作業は、2人以上でおこなってください。
- リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。
- 通路の幅は約66cm必要です。


本体の取り出し方



本体上部と下部を
しっかり持ってください。

本体上部と下部を持ち、まっすぐ上に持ち上げて箱から取り出してください。
肩メカを持たないように注意してください。

移動方法

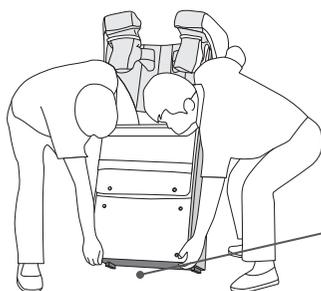

リモコンをリモコンポケットに入れ、本体前面下部を浮かせて本体下部を持ちます。
手をはさまないように注意してください。

本体前面下部を
浮かせてください。

リモコンはリモコンポケットに入れてください。

肩メカを持たないでください。



ゆっくりと床におろしてください。
手をはさまないように注意してください。



本体下部と背面上部を持ち、バランスを保ちながら上に持ち上げ移動してください。
肩メカを持たないように注意してください。



注意

- 人をのせたまま移動させないでください。
- 電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて移動してください。
→ 電源コード、アース線が破損し、火災や感電の原因になります。


ご使用前に

アース線の取付け方

万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

①コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアース線を、コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでないかときどき点検してください。

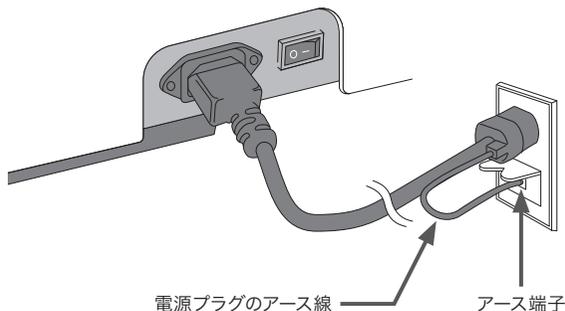


②コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店にご相談ください。


電源コードは、必ず本体に付属のものをご使用ください。とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しないでください。

主電源の入れ方

① 電源コードのコネクタを本体右部のインレットに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

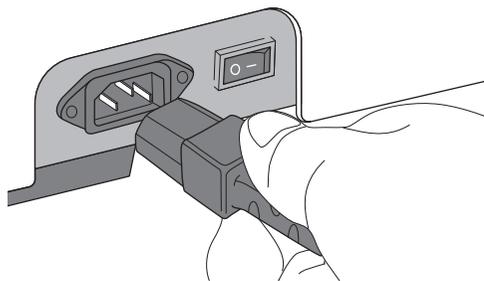

② 本体右部の主電源スイッチを入れます。

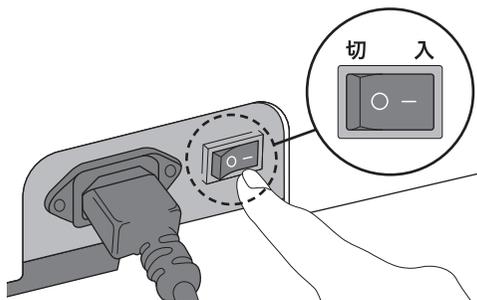

※肩メカが途中で止まっているとき主電源スイッチを入ると、肩メカは自動的に収納位置（背もたれ上部）まで移動して停止します。



警告

- 変圧器を用いた使用はしないでください。
→故障や感電の原因になります。
- 日本国外では使用しないでください。
→故障や感電の原因になります。



注意

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

布地の確認

ご使用前には布地の破れがないか確認してください。




注意

- ご使用前には必ず本体布地が破れていないか確認してください。またその他の部分にも破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでも勝手に修理などせず、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。施療部の布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

リモコンの取り回し方

リモコンケーブルは座面裏から伸びています。

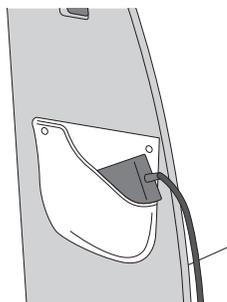


リモコンを使用しないときは本体右側にあるリモコンポケットへ収納し、コードが足に引っかからないようにしてください。

椅子の調節

フットレストの広げ方

フットレストはマグネットで固定されています。

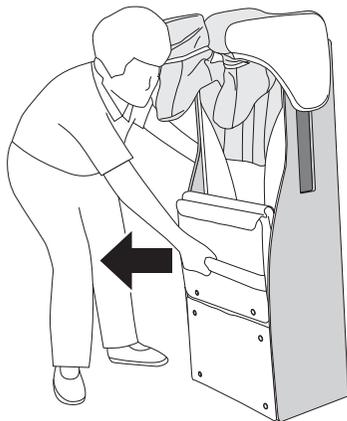

フットレスト前面の持ち手を持ち、手前に引っ張ってください。安全のため、しっかり最後まで広げてください。

フットレストの折りたたみ方

広げ方の逆の手順でおこなってください。




注意

- フットレストが完全に広がっていることを確認してから使用してください。
 - ケガや故障、事故の原因になります。
- 折りたたみ時は指などを挟まないように、ゆっくりたたんでください。
 - ケガの原因になります。
- 停電等で動作中に電源が切れた場合に背もたれのエアが抜けない事があります。
 - 主電源を入れ直すとエアが抜けます。


椅子の調節

椅子の座り方

肩メカは上部に静止した状態になっています(収納状態)。安全のため、肩メカの位置を確認し、収納状態以外の場所にある場合はすぐに座らず主電源スイッチを入れて、肩メカを収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

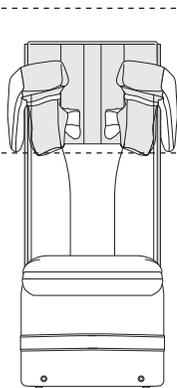

肩メカが下がった状態

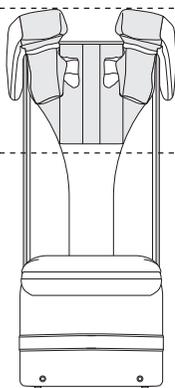

肩メカの収納状態

肩メカの移動範囲
約18cm




注意

- フットレストが完全に広がっていない状態で椅子に座らないでください。
→フットレストや座面に衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により事故やケガの原因となります。
- 肩メカが動作していないことを確認してから、乗り降りをおこなってください。

椅子への乗り降りの際の注意点

一度座面前の中央部へ腰をかけ、ゆっくりと奥まで座りなおしてください。浅く座ると、肩メカがうまく動作しない場合があります。背中にしっかりと背パッドがあたることを確認してください。片側に傾く、片側だけ肩を出すなどの行為はしないでください。


正しく座っている状態

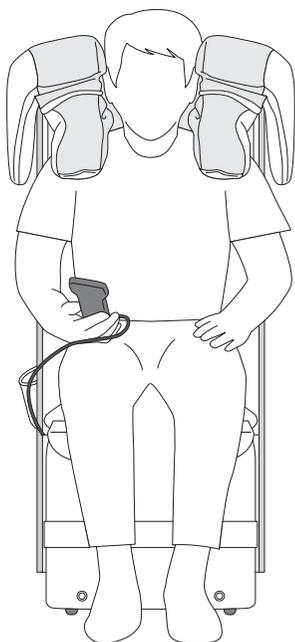


髪型・装飾品について



髪をうしろでまとめてください。

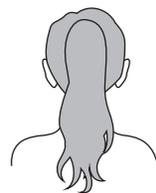


装飾品、イヤホン、ヘッドフォン等をつけて使用しないでください。肩メカの動作部に装飾品やコードなどが巻き込まれ、ケガの原因になる恐れがあります。

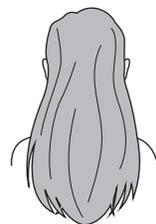

肩メカが肩に当たってうまく乗れない場合

乗り降りの際に肩メカが背に当たる場合は、背を屈めて潜り込むように座ってください。
その後、ゆっくりと奥まで座りなおしてください。
無理に入れようとすると故障の原因になりますので、注意してください。

乗り降りの際に肩メカが背中に当たる場合は背を屈めて潜り込むように座る

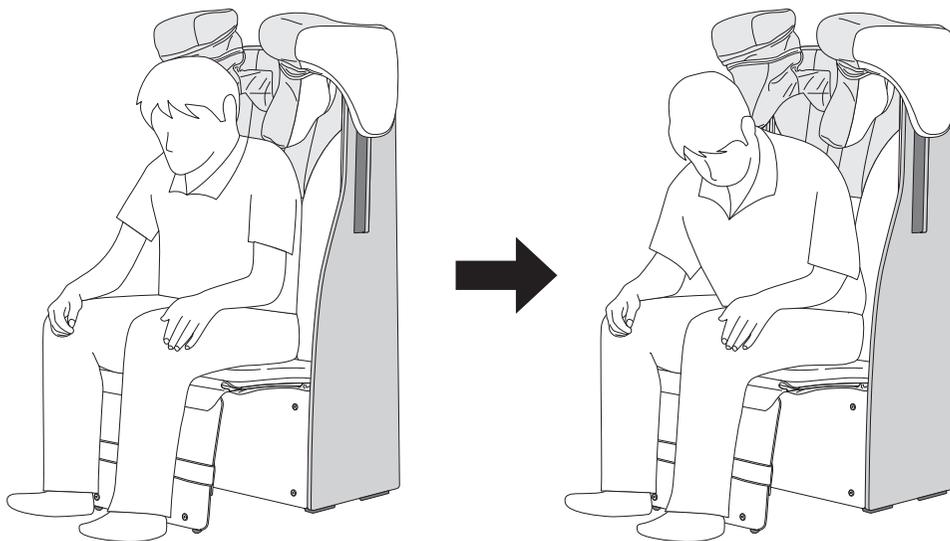

⚠ 注意

- 上記以外の乗り降りは絶対にしないでください。
→事故やケガ、故障の原因になります。
- 肩メカが動作中の場合は、動作が終わるのを待ってから椅子への乗り降りをおこなってください。
- 肩メカが降りている状態でマッサージチェアから降りる場合は、動作を止めてから上半身を前方に屈めてください。スイング機構がありますので肩メカから抜け出すことができます。
- 肩メカの間隙に身体やものが挟まれないように注意してください。
- 肩メカは頭部付近にあります。使用される際は、髪が長い人は髪をまとめてください。動作時に髪が引っかかる恐れがあります。
- 髪飾り、ピアス、イヤリング、ネックレス、コード付のイヤホン、ヘッドフォンをつけて使用しないでください。また、首の根元に帽子となるフードが付いている衣類や帽子を着用しての使用はご遠慮ください。肩メカの動作部に装飾品やコード、衣類の一部が巻き込まれ、ケガの原因になる恐れがあります。
- 素肌では使用しないでください。首回りが大きく開いた衣類の場合、肩メカもみ玉が肌に直接当たり皮膚が擦れ、痛みやケガの原因になる恐れがあります。

コースの種類と特長

メディカルコース 筋肉の疲労回復を目的としたコースです。目的に合わせてお選びください。



ガンココース

ガンコな肩こりをお持ちの方に
おすすめの強くゆっくりもみほぐすコースです。



ソフトコース

肩はこっているが強くもまれるのは苦手だという方に
おすすめのやさしくもみほぐすコースです。



美姿勢コース

姿勢を調整することを目的とした、
胸を反らせる動作を多く行うコースです。



鎖骨リンパコース

肩を内側から外側に向かって施療することで
血行を促進させます。



左集中コース

左肩がこりやすい方におすすめの
左肩をしっかりもみほぐすコースです。




右集中コース

右肩がこりやすい方におすすめの
右肩をしっかりもみほぐすコースです。

リモコンの操作方法

- 疲労の回復を目的とした6種類のコースを用意しています。
- 各コースボタンで目的に合わせてコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージをおこないます。

操作方法

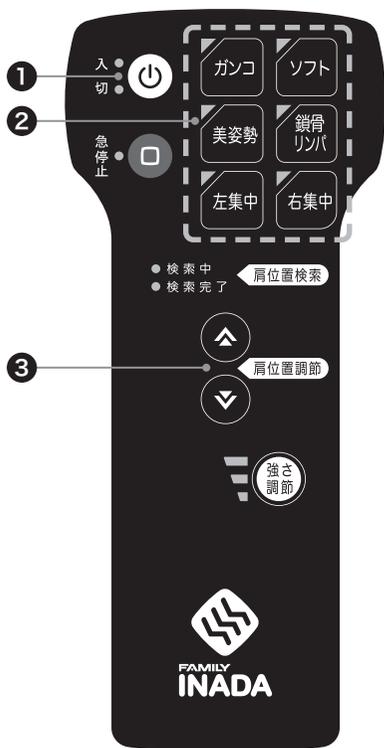

① 「入/切」ボタンを押す。

5分間入力がなければ自動的に電源が切れて、オレンジ色のランプが点灯します。

② お好きなコースのボタンを押します。

メディカルコースから好みのコースをお選びください。
※コース選択後、途中で変更を行えません。

③ 肩位置調節ができます。

肩位置検索ランプの検索中ランプが点滅している間に、肩メカもみ玉を肩の位置に調節してください。
調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。

④ コースが始まります。

指圧する位置の調節が完了すると検索完了ランプが点灯し、コースが始まります。


⑤ コースが終了します。

肩メカもみ玉が収納位置まで戻ります。その後電源が切れて、オレンジ色のランプが点灯します。

※リモコンに電源ボタンのないタイプの方はP16をご確認ください。

肩位置の調節

肩位置調節ボタンで、肩位置を調節してください。

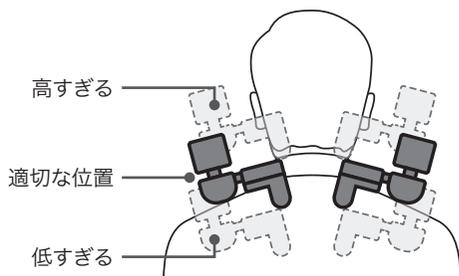

肩位置ボタン

- ▲ 押している間、肩メカもみ玉が上に動き続けます。
- ▼ 押している間、肩メカもみ玉が下に動き続けます。

- 肩メカもみ玉の位置が最上部（最下部）にあるときに、さらに上昇（下降）を選択しても動きません。
※「ピピピ」と警告音が鳴ります。
- メディカルコースを選択していない場合は肩位置ボタンを押しても動作しません。



注意

- 肩位置が高すぎる場合は後頭部にあたらないように調節してください。
→ケガのおそれがあります。
- 体調に合わせて強さを調節してください。
→強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。

リモコンの操作方法

強さ調節

コース中のもみの強さを調節できます。



強さ調節ボタン

- ボタンを押して、もみの強さを変更することができます。
- ボタンを押すと「中」→「強」→「弱」と変わります。(マッサージ開始時は「中」に設定されています)

コースの途中終了

途中で終了する場合ははじめ、緊急時や動作中に異常を感じたときは、[急停止]ボタンを押してください。肩メカのもみ動作が停止し、上昇します。



- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。
→強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座面のすき間や可動部に手や足を入れしないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

使い終わったら

肩メカが収納位置に移動し、完全に停止し背もたれのエアが抜けたことを確認してから、フットレストを折りたたんでください。




- コース終了後は、肩メカもみ玉が収納位置に移動します。移動中には、緊急の時を除いて、主電源のスイッチをきらないでください。
- 使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- コード類に引っかかって転倒しないようにしてください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。

電子決済BOX

電子決済BOXがついている場合

電子決済BOXが付いている製品では、マッサージチェアご利用前に決済用QRコードをお手持ちのスマートフォンで読み取ることでご利用いただけます。(製品の種類により電子決済BOXが付いていないものがあります)

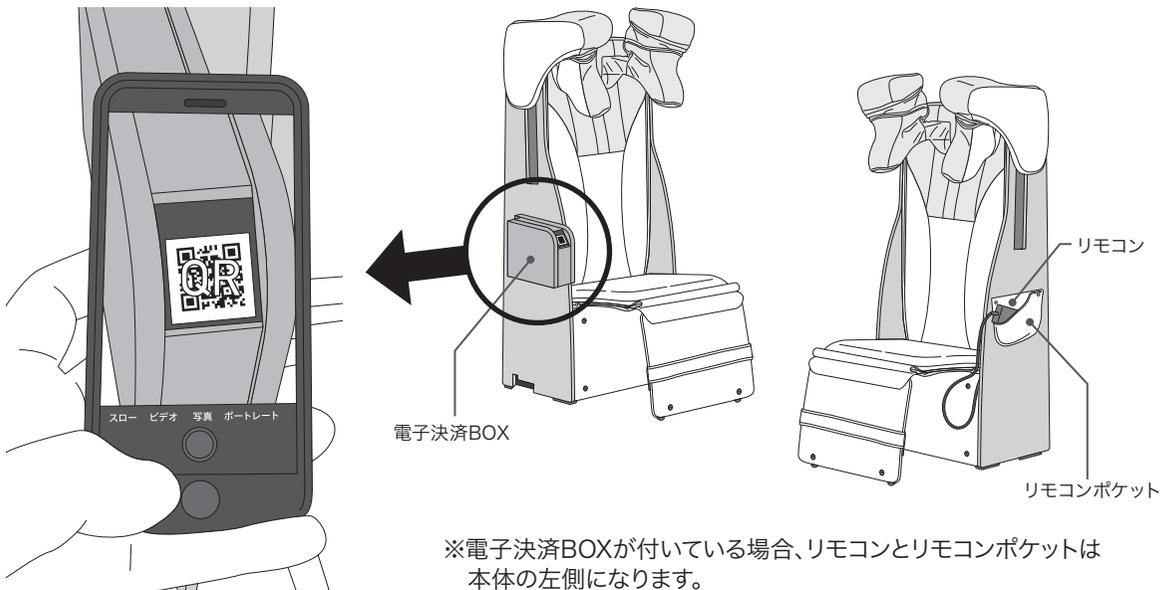


ご利用手順

- ① QRコードをお手持ちのスマートフォンで読み取り、決済をおこないます。
(QRコード読み取り後の画面の案内にしたがって決済をおこなってください。)
- ② 決済が終了すると、運転中ランプが光ります。お好きなコースを選択してください。
- ③ コースが開始します。(肩位置検索終了後、マッサージが開始します)
- ④ 3分間のマッサージが終了すると、肩メカが収納位置まで戻り停止します。
※途中で急停止ボタンを押した場合はその時点でコースが終了します。

【電子決済BOX】

電子決済BOX付きリモコン

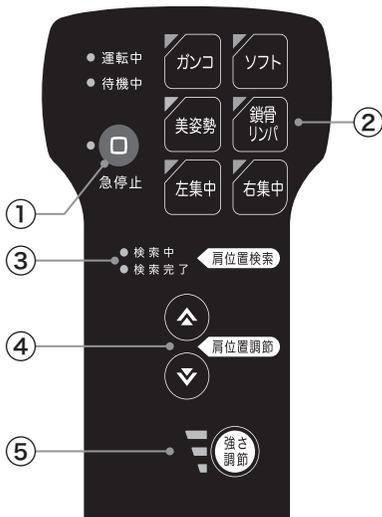

①	急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。肩メカの回転が停止し、上昇します。
②	メディカルコースボタン	各ボタンでコースを選択できます。
③	肩位置検索表示ランプ	肩位置の検索中と完了をランプでお知らせします。
④	肩位置調節ボタン	肩メカの位置調節に使用します。
⑤	強さ調節ボタン	コース中のもみの強さを調節できます。

Q フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

A 設置しても大丈夫です。

ただし、床を傷つけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをおすすめします。(畳等も同様です)

Q ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

A 火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を痛め、そこから発火するおそれがあります。

Q 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

A 感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容にしたがってください。

- 本体左部の主電源スイッチを切る。
- 電源プラグをコンセントから抜く。

以上のことをおこなった上、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンターにご相談ください。

Q マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

A 次のことをおこなってみてください。

- リモコンの強さ調節ボタンで調節する。
- 肩メカの位置を上げる。

以上の方法でより弱くマッサージをおこなうことができます。ただし、肩位置が高すぎる場合は後頭部に当たらないように注意してください。

Q マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

A 次のことをおこなってみてください。

- リモコンの強さ調節ボタンで調節する。
- 肩メカの位置を下げる。

以上の方法でより強くマッサージをおこなうことができます。

Q 体重が重くても大丈夫ですか？

A 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

Q 身長が150cm未満の人や180cm以上の人でも使えますか？

A お使いいただけます。

肩メカの肩位置検索時に肩位置をしっかりと合わせてください。

Q 使用者の年齢制限はありますか？

A 小さなお子様や自分の意思で操作できない方は安全上ご使用になれません。


高齢者の方で80歳以上になると骨粗しょう症の危険性が高くなりますので、ご使用前には医師にご相談の上ご使用ください。

Q 1日にマッサージチェアは何回乗ってもいいですか？

A マッサージは1人あたり、1日30分以内を目安にしてください。

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までご相談ください。

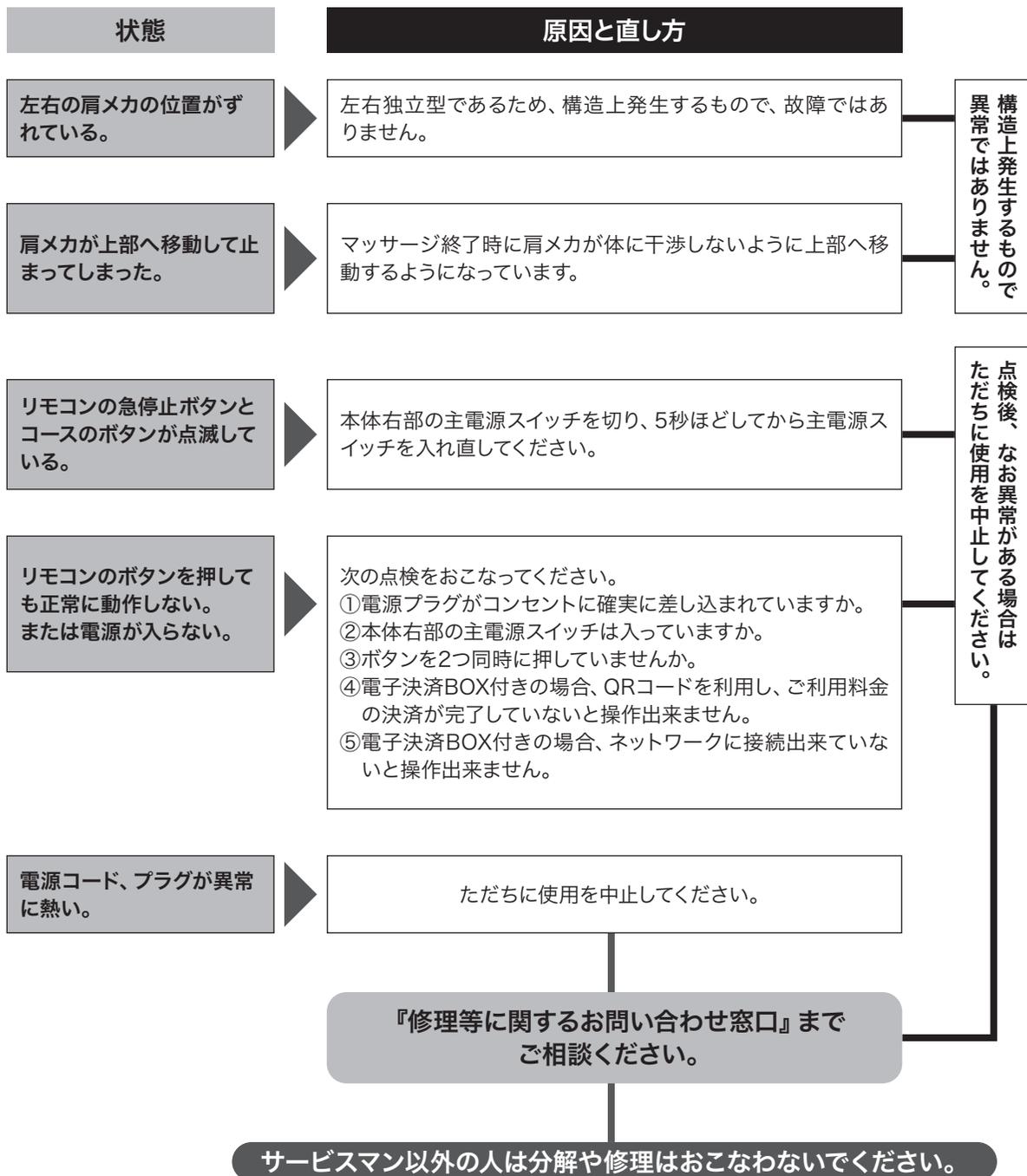

【故障かな?と思ったら】

故障かな?と思ったら

動作時の音

構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

動作中は下記のような作動音がします。

もみ動作時のもみ玉と布のすれる音

キュッキュッ音
ギュウギュウ音

もみ玉の昇降、もみ動作時の音

ウィーン音
ゴロゴロ音
コトツ音

※上記の音について、性能等に影響はありません。

保管とお手入れの仕方

保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本体の周辺にペットを近づけないようにしてください。



注意

- 直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。
- コード類はねじれをほどいて保管してください。

お手入れの仕方



注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

【背パッド・各ボディのお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。



注意

- ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【リモコンのお手入れ】

リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。


アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、18、19ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。

点検後、まだ異常がありましたら『修理等に関するお問い合わせ窓口』へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- (1) お名前・ご住所・お電話番号
- (2) 販売名…この取扱説明書の21ページの仕様欄、または、リモコン裏面に貼ってある社銘板をご覧ください。
- (3) 製造番号…リモコン裏面に貼ってある社銘板をご覧ください。
- (4) 故障の状態(できるだけ詳しくお知らせください。)
- (例) リモコンのボタンが下図のように点滅している場合は、点滅しているコースの名称をお知らせください。

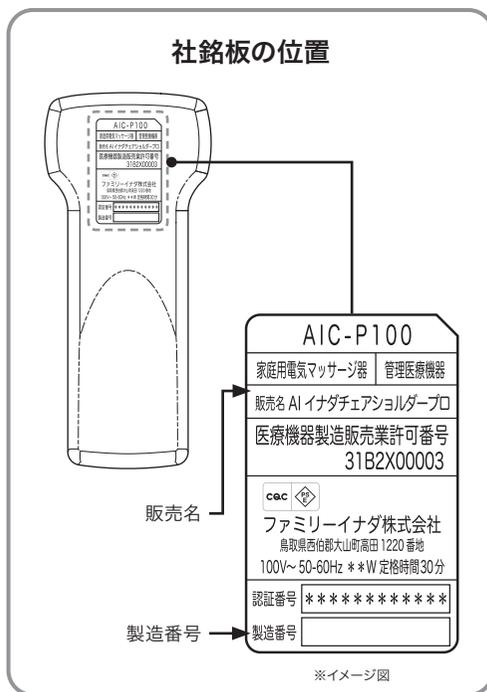

●補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます。) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。

●アフターサービスについてご不明な点は

『修理等に関するお問い合わせ窓口』にお問い合わせください。

仕様

販売名	AIイナダチェア ショルダープロ	
使用電源	AC100V	
定格消費電力	110W	
定格周波数	50-60Hz	
定格時間	30分	
電撃に対する保護の形式	クラス0I機器	
肩メカ	上下移動速さ	もみ回数 最小約4回/分、最大約14回/分 上下移動速さ 最小約1.3cm/秒、最大約2.6cm/秒
メディカルコース	6種類	
エア圧力	約35kPa	
オートタイマー	約3分	
本体の寸法	幅約63cm×奥行約40 (67) cm×高さ約124cm 奥行の () 内の数字は座面使用時の状態です。	
重量	約31kg	
外装布地	合成繊維、合成皮革	
付属品	電源コード、操作ガイド	
包装	1梱包/1台	
類別	機械器具 (77) バイブレーター	
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000) 管理医療機器	
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003	
医療機器認証番号	303AKBZX00063000	
製造販売業者	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地	
製造業者	ファミリーイナダ株式会社	

お客様相談窓口のご案内

- 製品に関するお問い合わせ窓口  0120-129-011
- 修理等に関するお問い合わせ窓口  0120-772-294

受付：土・日・祝を除く平日 9：00～17：00

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員
 **ファミリーチャア株式会社**
<https://www.family-chair.co.jp>