

● お部屋にすっとなじむ、コロンと可愛い。  
 毎日の“ちょっと休憩”を支える、  
 やさしいマッサージチェア。

# i-CORON



はじめての一台にぴったり。

## i-CORON ..... アイコロン ..... 誕生。

### リクライニング×ロングストローク

最大153°までリクライニング可能なシートと、約88cmのロングストローク設計により、首からお尻までをなめらかにほぐします。身体のラインに沿った心地よいマッサージ動作で全身をしっかりケアし、ゆったりとしたリラックスタイムをお楽しみいただけます。



### やさしく包み込む12枚エアバッグ

座面の側面から脚まわりまで、合計12枚のエアバッグをバランスよく配置。骨盤まわりをやさしく包み込み、下半身にたまった疲れを心地よくほぐします。やわらかなエアの力で、深いリラックスへ導きます。



### 収納&リラックス性

使わないときは、フットレストをくるっと回すだけで簡単に収納可能。Bluetooth®スピーカーを搭載しており、お気に入りの音楽を楽しみながらゆったりとくつろげます。リクライニングを活かした“コンフォートシートスタイル”で、極上の休息時間を。



### 暮らしになじむ設計

壁から約30cmあれば設置できる省スペース設計。お部屋のレイアウトを気にせず配置できます。スマホポケットを備え、スマホの充電にも対応。操作は使いやすいダイヤル式リモコンを採用。日常の中に自然になじむ、使いやすさにもこだわりました。



#### 6つの自動コース

疲労回復

骨盤

首肩

腰おしり

おはよう

おやすみ

#### 4つの手動コース

もみ

たたき

もみ・たたき

エアー

詳しくはこちら




## ■ 製品仕様

販売名	i-CORON (アイコロン) FIP-2224		
使用電源	AC100V		
定格消費電力	95W		
定格周波数	50-60Hz		
定格時間	30分		
類別	機械器具 (77) バイブレーター		
一般的名称等	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000) 管理医療機器		
認証番号	307AKBZX00098000		
JANコード	ブラウン 4992648131238	ネイビー 4992648131245	アイボリー 4992648131252
USB充電定格出力	DC 5V-20V/MAX 45W		
USBポート数	USB typeCポート×1ポート		
もみ速さ	最小18回/分、最大28回/分		
たたき速さ	最小230回/分、最大392回/分		
もみ玉上下移動速さ	5.5cm/秒		
マッサージ範囲	88cm		
エア圧力	約75kPa		
自動コース	6種類		
手動コース	4種類		
リクライニング角度	水平面に対して約122~153° 無段階 (電動リクライニング)		
本体の寸法	幅約71cm×奥行約112(147)cm×高さ約101(80)cm 奥行・高さの( )内の数字は背もたれを倒した状態の寸法		
質量	約59kg		
外装布地	合成皮革		
付属品	電源コード・端子保護キャップ		
包装	1梱包/1台		
製造販売元	ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地		

## ■ カラーバリエーション



## ■ 本体の寸法

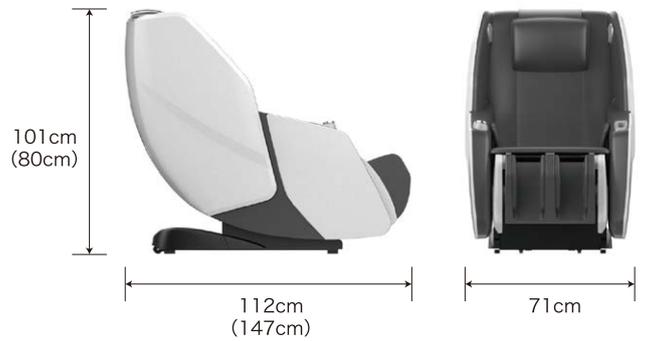

( )内の数字は背もたれを倒した状態の寸法



■ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。

### 使用目的又は効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。  
●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす

### ▲安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※次の人は、使用しないでください。

医師からマッサージを禁じられている人例：血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(痛)、急性静脈リゅう(痛)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人◎施術部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期にある人、衰弱している人。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人◎温度感覚喪失が認められる人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや、座面の下等)で遊ばせたり、本体の上ののせたり、座らせたりしないでください。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためのみ玉が止まることがあります。その場合はリクライニングを起こしたり身体を浮かせ気味にしてご使用ください。特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



<https://www.family-chair.co.jp>

製品に関するお問い合わせ窓口 0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口 0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00~17:00 (12:00~13:00は除く)

本社：大阪府大阪市淀川区宮原四丁目2番10号 PMO EX新大阪 6階  
製造販売元：ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(大山工場)



お問い合わせ

※このカタログの内容は2025年12月現在のものです。

202512-01