

本体運搬方法と注意事項

FAMILY

ご注意ください

通路の幅が70cm以下の場合は通常搬入できません。お買い上げいただきました販売店にご相談ください。


※あて布などの養生部材は別途用意してください。

各状態でのサイズ比較

梱包時のサイズ(2箱梱包)


フット、アーム
梱包重量:約60kg
本体重量:約42kg

本体
梱包重量:約110kg
本体重量:約88kg

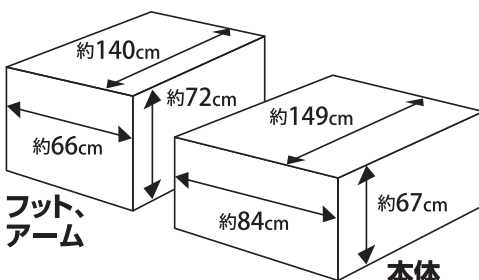


搬入可能な
通路幅: 養生後 約90cm以上

開梱時のサイズ

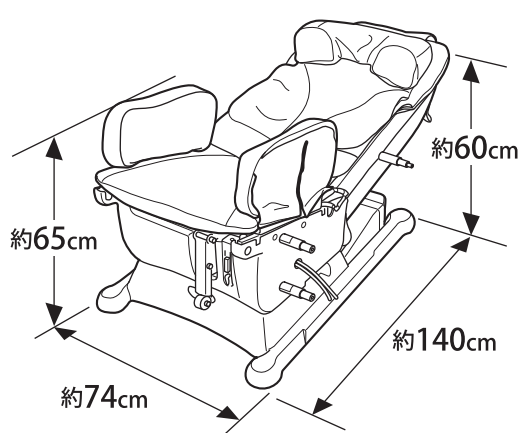

搬入可能な
通路幅: 養生後 約70cm以上

背もたれを起こした時のサイズ

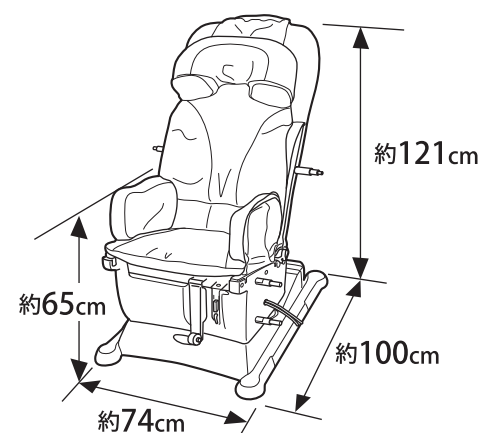

搬入可能な
通路幅: 養生後 約80cm以上

起こすときは床にあて布を敷いてください。

近くにコンセントがある場合


持ち方・運び方

開梱して本体を運ぶ時




本体を横に倒す

※リモコンを落とさないようにしてください。

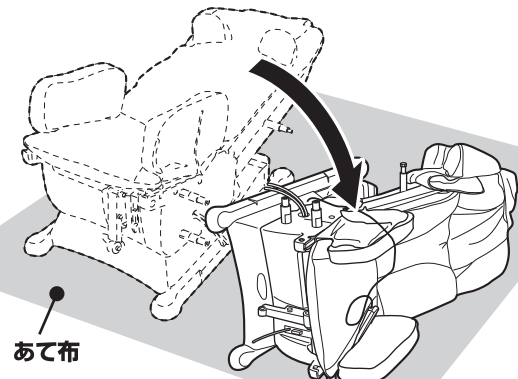


背もたれを起こす


- ① アクセサリーボックス(本体同梱)から電源コードを取り出します。
- ② 本体後部右下のインレット(差込口)にコネクターを差し込んでください。
- ③ コンセントに電源プラグを差し込んでください。
- ④ POWER(主電源)スイッチを「ON」にしてください。
- ⑤ リモコンのリクライニングボタンで背もたれを起こしてください。

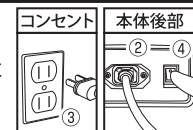


- ⑥ フットレスト取付部が上がったままになっている場合は、リモコンのフットレストボタンでフットレストを下ろしてください。

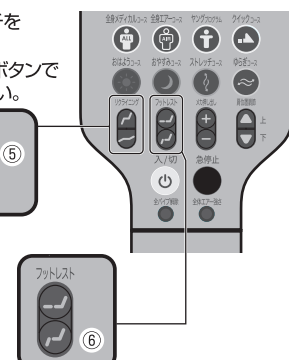

※シャフトを持ってください。

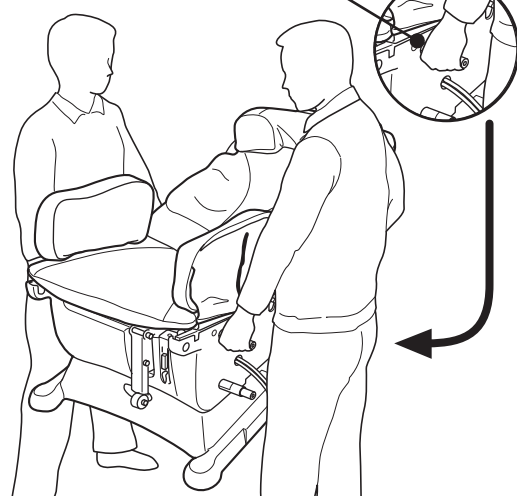

※肩もみユニットは落ちないように背もたれの横に乗せてください。

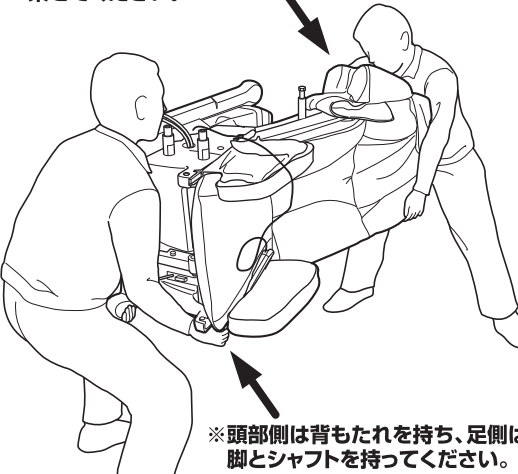

①→②の順に持ち上げてください。



特徴

- 養生後、通路の幅が約140cm以上必要です。
- 高さの無い場所での移動に適しています。
- 曲がり角や方向転換が必要な場所での移動には適していません。

- 養生後、通路の幅が約70cm以上必要です。
- 高さの無い場所での移動に適しています。
- 曲がり角や方向転換が必要な場所での移動には適していません。

- 養生後、通路の幅が約80cm以上必要です。
- 背もたれを起こすことで重心が安定します。
- 階段等、重心が不安定な場所での移動に適しています。
- 曲がり角や方向転換が必要な場所での移動に適しています。
- 高さの無い場所での移動には適していません。

注意事項

- 間口・通路のサイズをご確認のうえ、上記の運搬方法を参考に搬入してください。
- 重量物ですのでゆっくり慎重に運搬してください。
- リモコンが付いていますので、運搬時に落とさないように注意してください。
- 搬入先の床や壁など、および商品を傷つけないように注意してください。
- ポケットのペンなどで商品を傷つけないように注意してください。
- 上記の運搬方法は一般的な通路を想定しています。上記の運搬方法での搬入が困難な場合、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

776821500

PANTONE 639 C