

体組成計 FBS-100 接続(ペアリング設定)・測定方法

体組成計で測定したデータについて

- ルピナスショルダーをお持ちのお客様は、ショルダー付属のタブレットと直接通信することができます。
※ルピナスショルダー出荷時は、ショルダー付属のタブレットと体組成計を接続された状態(ペアリング状態)でお届けしています。
- ルピナス/ルピナスライトをお持ちのお客様は、お手持ちのスマートフォンで専用アプリ「ルピナスリンク 365」をご使用いただくことで、測定データを確認することができます。

1 アプリ「ルピナスリンク 365」のホーム画から接続・測定画面に移動



ホーム画面を下に移動させると、
測定 ボタンが表示されますので押してください。

2 体組成計とスマートフォンの接続（ペアリング設定）

③接続・測定画面（未接続状態）

iPhone



Android



接続・測定画面が表示されます。

接続・測定画面に“未接続”表示されている場合、ペアリング設定が必要です。 **接続** ボタンを押してください。

体組成計 接続(ペアリング設定)の準備

接続をおこなう前に、体組成計に電池を入れてください。

③接続・測定画面（接続中画面）

iPhone



Android



接続

ボタンを押すと接続が開始されます。

接続中画面が表示されましたら、体組成計の本体裏面にあるペアリング



ボタン

を押して、体組成計をペアリングモードにしてください。

- スマートフォンの Bluetooth 設定が OFF の場合は、体組成計との接続(ペアリング)ができませんので、Bluetooth 設定を ON にしてください。
- Android の場合は、体組成計との接続(ペアリング設定)時にスマートフォンの位置情報へのアクセスを「許可」に設定後、ペアリングを開始してください。位置情報へのアクセスを許可しない場合、体組成計との接続(ペアリング設定)ができません。

体組成計 ペアリングモード



④接続・測定画面（接続中 機器に登録するユーザー選択画面）

iPhone



Android



ユーザー選択をおこないます。ルピナスリンク 365 の使用者毎にユーザーを分けて設定することで、測定後のデータを自動で接続することができます。（例：A さん→ユーザー1、B さん→ユーザー2 など。）

- iPhone の場合：選択中のユーザーは **ユーザ1** と青色で表示されます。ユーザーを選択後、**接続** ボタンを押してください。
- Android の場合：選択中のユーザーが  で表示されています。ユーザーを選択後、**INADA 体組成計** の表示を押してください。（ユーザーは灰色の丸枠  を押すことで切り替わります）

体組成計 ペアリングモード



⑤接続・測定画面（ペアリング接続済み画面）

iPhone



Android



ペアリング接続が完了すると、接続・測定画面に **ペアリング済み** が表示され、選択したユーザーが **INADA 体組成計 ユーザー1** と表示されます。また、測定ボタンの色が灰色から紫色に **測定** 変化します。

体組成計 ペアリング完了時



3 体組成計の測定方法・データ転送方法

①接続/測定画面（ペアリング接続済み画面）

iPhone



Android



接続・測定画面に表示される **測定** を押してください。

体組成計の **SET** ボタンを押して、接続(ペアリング設定)時に登録したユーザーを選択してください。

※初回測定時は体組成計でのユーザー情報の登録が必要です。詳しい測定方法は、付属の取扱説明書をご確認ください。

体組成計 ユーザー選択画面



1. **▲** または **▼** ボタンを押してペアリング設定時に登録したユーザー **P1** (P1~P4) を選択し、**SET** ボタンで決定します。
2. **▲** または **▼** ボタンを押して性別 **P1** **♂** **♀** を選択し、**SET** ボタンで決定します。
3. **▲** または **▼** ボタンを押して身長 **160** を入力し、**SET** ボタンで決定します。
4. **▲** または **▼** ボタンを押して年齢 **23** を入力し、**SET** ボタンで決定します。

②接続・測定画面（測定中画面）

iPhone



Android



測定が始まります。体組成計で測定をおこなってください。

※体組成計の詳しい測定方法は付属の取扱説明書をご確認ください。

体組成計 測定中画面



パターン点滅

測定中はディスプレイにパターンが点滅します。

点滅が終了すると、測定結果が表示されます。

※パターン点滅中は体組成計から降りないでください。

③ホーム画面（測定画面）




測定が終了すると、結果のデータが転送され、ホーム画面に測定結果が表示されます。

体組成計 測定結果画面



● 測定マーク

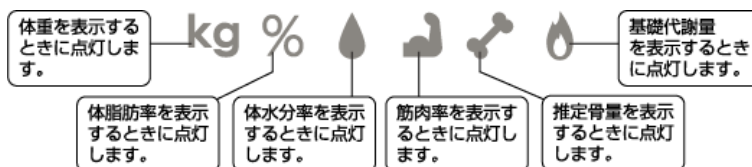

● 測定結果の表示

測定結果は、体重→体脂肪率→体水分率→筋肉率→推定骨量→基礎代謝→BMIの順で表示され、それを2回繰り返したあと自動で電源が切れます。

体組成計 測定結果のデータ転送画面



体組成計の測定が終了すると、測定結果のデータがルピナスリンク 365 に転送されます。転送中は体組成計の画面に Bluetooth マークが表示され、点滅します。

転送後、体組成計の電源が自動で切れます。