

MEDICALCHAIR **W** ENGINE UNIVERSAL

ファミリーメディカルチェア ダブル・エンジン ユニバーサル

FDX-WU110

このたびは、ファミリーメディカルチェア ダブル・エンジン ユニバーサルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみいただけます。皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用ください。



もくじ

■ 安全上のご注意	1
■ おもな特長と効能・効果	4
■ 各部の名前とはたらき	5
■ ご使用の前に	7
■ 椅子の調節	9
■ 使い終わったら	13
■ コースの種類と特長	14
■ 自動コース	15
■ お好みコース	17
■ 故障かな？と思ったら	19
■ 安全のために商品の点検を	20
■ Q&A	21
■ 保管とお手入れの仕方	23
■ アフターサービスについて	24
■ 仕様	25
■ お問い合わせ窓口・保証書	裏表紙

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

日本国内専用

この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。
PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.

この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。
JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.

- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎この製品は、部品調達及び部品組み立てを中国にある弊社工場で分担し、日本国内の弊社工場にて企画／開発／設計から最終組み立て、及び品質保証をおこなっております。
- ◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外（業務用等）でご使用の場合は、お買い上げの販売店または『製品に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

添付文書

取扱説明書

Massage
+
Medical



安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5～6ページをご覧ください。

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

表示の種類

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味

 禁止	禁止の行為であることを示しています。
 分解禁止	分解してはいけないことを示しています。
 ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。
 禁止	風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。
 強制	行為を強制したり指示したりするものです。
 プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
 アース 取り付け	アースを取り付けることを示しています。

ご使用場所の注意

 注意	
 禁止	●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。 →感電や故障の原因になります。
 強制	●床面が水平な場所に置いて使用してください。 →不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。
 アース 取り付け	●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。 詳しくは、8ページをご覧ください。
 禁止	●アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。

ご使用前の注意点

⚠警告



禁止

- 次の人は使用しないでください。
○ 医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]等。○ 急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人
- 電源は交流100V以外では使用しないでください。
→ 火災や感電の原因になります。
- 変圧器を用いた使用はしないでください。
→ 故障や感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいとき等は使用しないでください。
→ 感電やショート・発火の原因になります。
- マッサージの前には必ず施療部の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理等に関するお問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご連絡ください。施療部の布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。
→ 布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。



強制

- 次の人は、使用前に医師に相談してください。
○ 心臓に障害のある人 ○ 糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
○ 骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊性)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ○ 施療部位に創傷のある人
○ 体温38℃以上(有熱期)の人 例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動等]の強い時期。衰弱しているとき
○ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ○ ペースメーカー等の電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
○ 背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
○ かたて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ○ 悪性のしゅよう(腫瘍)のある人
○ 安静を必要とする人 ○ 内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)等の急性症状のある人 ○ 温度感覚喪失が認められる人
○ 医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ○ リウマチ症、痛風等により関節が変形している人
○ めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ○ 捻挫、肉離れ等の炎症性の人 ○ 腱鞘炎、またはそのおそれのある人
- 特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
- 使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

⚠注意



禁止

- この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布等を併用しないでください。
→ 体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。
- 人をのせたまま移動しないでください。
→ 本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
- フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。
→ フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。
- 付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。



強制

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。
→ 故障や感電の原因になります。
- 電源プラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。
→ 感電やショート・発火の原因になります。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。
- ご使用前には背もたれを完全に起こし体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。
→ はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。
- 安全のために、メカの位置を確認し、収納位置にない場合は、主電源スイッチを入れ、機器が正常に動作することを確認してからゆっくり座ってください。
- 椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がるとき以外は、フットレストの上ののる、立つ、座る等の行為はしないでください。
→ 転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
- しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。

ご使用時の注意点

⚠警告



禁止

- 電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
→ コードが破損し、火災や感電の原因になります。
- 本体やリモコンに水等をこぼさないでください。
→ 感電やショート・発火の原因になります。
- お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下等)で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。
→ 事故やケガの原因になります。
- 椅子に2人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様(乳児等)を抱きかかえてのご使用はおやめください。
→ 事故やケガの原因になります。
- 布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→ 事故やケガ・感電の原因になります。修理は『修理等に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)にご相談ください。
- フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。



ぬれ手禁止

- ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。
→ 感電や故障の原因になります。



強制

- マッサージコース開始前やリクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。
→ 事故やケガの原因になります。
- 体や物がはさまこまれた場合、リクライニングボタンを押して安全な位置まで戻してください。

安全上のご注意

ご使用時の注意点

⚠注意



禁止

- 素肌では使用しないでください。
- マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。
→事故やケガの原因になります。
- 頭部、胸部、腹部、関節部(ひじ、ひざ等)には使用しないでください。
→気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋等には柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。
- もみ玉が上下する部分、リクライニング、座もみメカ周辺等の可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。
→ケガの原因になります。
- フットレストは脚部以外には使用しないでください。
→ケガの原因になります。
- 座もみメカは座部以外には使用しないでください。
→ケガの原因になります。
- マッサージチェアを無人で動作させないでください。
→事故やケガの原因になります。



強制

- 緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの[急停止]ボタンを押して、動作を停止させてください。
- 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。
- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)にご相談ください。
→強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。
- マッサージ中は眠らないように注意してください。
→ケガの原因になります。
- マッサージは、1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れないでください。
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。
- 座部のマッサージ中に座もみからずれた場合、無理に戻さないでください。
→無理に戻そうとすると、故障の原因になります。



プラグを抜く

- 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。
- 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して、主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)に点検・修理を依頼してください。
→感電や漏電・ショート等による火災のおそれがあります。

ご使用後や使用しないときの注意点

⚠注意



禁止

- 使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 電源コードは本機以外では使用しないでください。
- 本機を使用後は、必ず背もたれを完全に起こし、フットレストを完全に下ろしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 本機に物を載せないでください。



プラグを抜く

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
→感電やショートによる火災の原因になります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
→ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

その他の注意点

⚠警告



禁止

- 本体の上に立たないでください。座部以外に座る等して、上から強い衝撃を与えないでください。
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。



分解禁止

- 機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)に連絡してください。
- 電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換は『修理等に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)に交換の依頼をしてください。
- 機器は改造しないでください。
→火災や感電、ケガの原因になります。

⚠注意



強制

- 他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

お願い

- 製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。

おもな特長と効能・効果

特長

エアーマッサージ充実

全身エアーマッサージ機能搭載

足裏からふくらはぎをマッサージするフットレスト、臀部をマッサージする座、肩から指先までをもむ腕・肩ユニットで全身をくまなくエアーマッサージします。

LEDで見やすい

スタイリッシュなりモコン

選択したコースボタンのLEDが光るので分かりやすく、ボタン操作も簡単です。

心地よい姿勢を簡単調節できる

電動リクライニング機能

背もたれの角度を床面に対して約120～約165°の範囲内で、好みの角度に調節できます。

新開発

座もみメカ搭載

骨盤周辺をエアータグとメカでしっかりもみほぐします。

アジャストセンサーによる

自動指圧点検索機能

マッサージ前に、その人の体型に応じて指圧点を自動的に検索。体型や目的に合わせて効果的なマッサージがおこなえるようになっています。

そのときその疲れに

多彩なコース機能

目的に合わせ、最適なコースを選べる自動コース、お好みに合わせて組み合わせることができるお好みコースを用意しました。

手元・座面を温める

手元・座面温熱ヒーター搭載

手元・座面にヒーターを搭載しています。身体を温めながらマッサージすることにより、リラックス効果を促します。

【おもな特長と効能・効果】

使用目的・効能または効果


あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす

※本機のリモコン、付属品の名称等に「指圧」の文言を使用しておりますが、効能または効果に指圧の代用は含まれておりません。

各部の名前とはたらき

本体

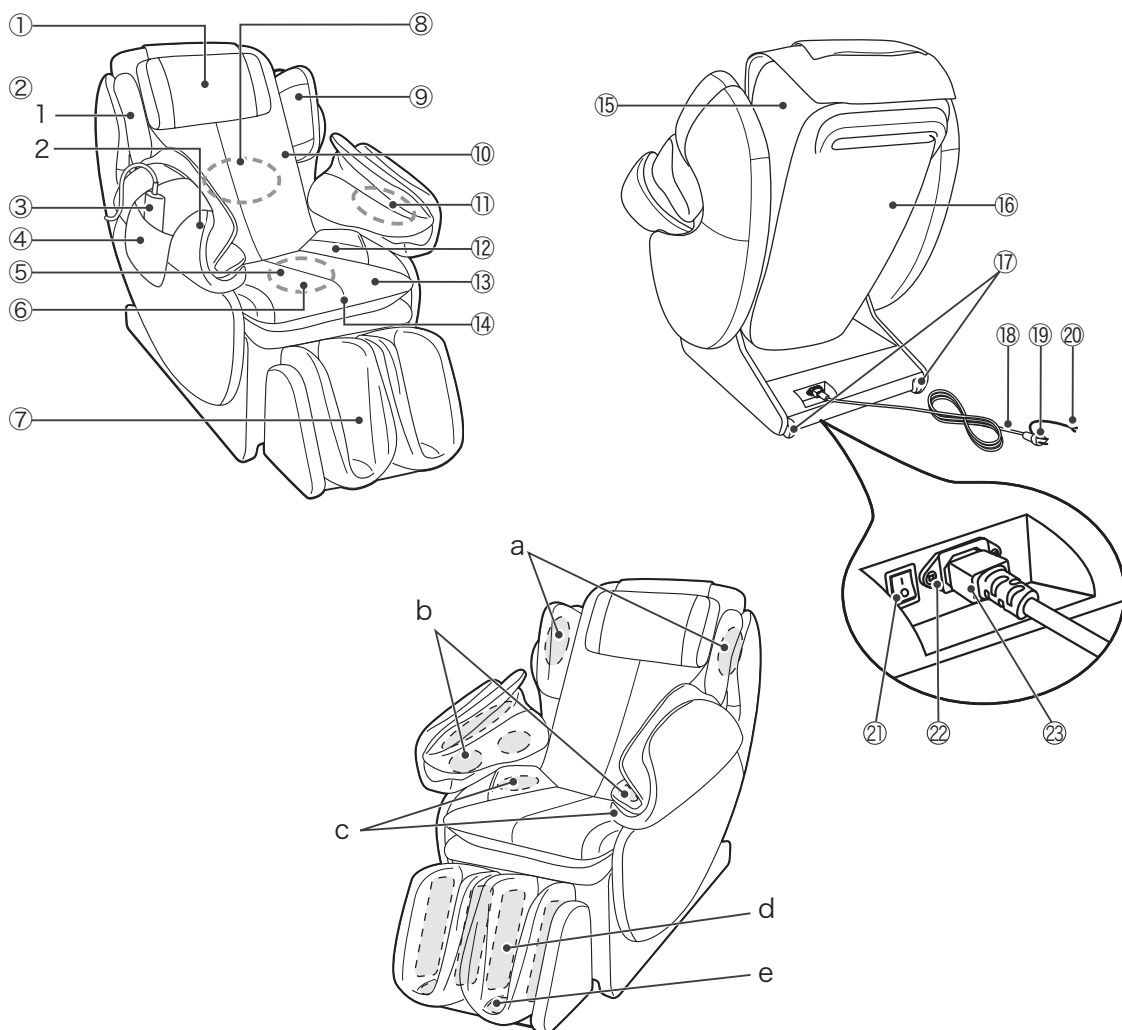

【各部の名前とはたらき】


①	枕
②	アームレスト / 左右各 1 個
・ 1	肩ユニット
・ 2	腕ユニット
③	リモコン
④	リモコンポケット
⑤	座面ヒーター / 左右各 1 個
⑥	座もみメカ
⑦	フットレスト
⑧	もみ玉 (通常は背もたれ上部に収納されています)

⑨	肩エア指圧パッド用 ポケット (P.12)
⑩	背パッド
⑪	手元ヒーター / 左右各 1 個
⑫	座もみ指圧パッド用 ポケット (P.12)
⑬	座
⑭	太もも指圧パッド用 ポケット (P.12)
⑮	背もたれ
⑯	裏カバー
⑰	キャスター
⑱	電源コード

⑲	電源プラグ
⑳	アース線
㉑	主電源スイッチ
㉒	インレット
㉓	コネクタ

a	肩エアセル	/4個
b	腕エアセル	/6個
c	骨盤エアセル	/4個
d	ふくらはぎエアセル	/8個
e	足裏エアセル	/10個

リモコン

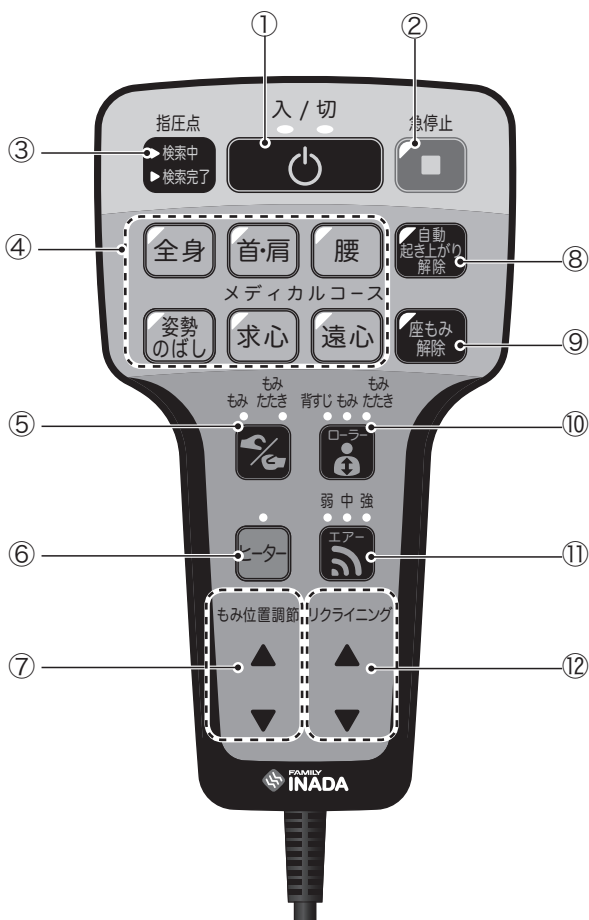

【各部の名前とはたらき】

①	入/切ボタン	リモコンの電源の「入」「切」をおこないます。リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色に点灯します。動作中に押すと、もみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。
②	急停止ボタン	緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。急停止中の時は赤色に点滅します。
③	指圧点検索表示ランプ	指圧点の検索中と検索完了をランプでお知らせします。
④	自動コースボタン (メディカルコース)	各ボタンでコースを選択できます。
⑤	もみ/もみたたきボタン	もみ、もみたたきを選択できます。
⑥	ヒーターボタン	手元と座面のヒーターの入/切ができます。
⑦	もみ位置調節ボタン	指圧点検索時の肩位置や、手動コース中のもみ玉の位置の調節に使用します。
⑧	自動起き上がり解除ボタン	コース終了時の、リクライニングの自動起き上がりを解除します。
⑨	座もみ解除ボタン	コース中の座もみマッサージを解除します。
⑩	ローラーボタン	背すじ、もみ、もみたたきを選択できます。
⑪	エアーマッサージボタン	エアーマッサージの強さを調節します。
⑫	リクライニングボタン	リクライニング角度を調節します。

⚠ 警告

- リモコンに水等をこぼさないでください。
- めれた手で操作しないでください。

⚠ 注意

- リモコンの上に座ったり、落したり、踏んだり、コードを強くひっぱったりしないでください。
- 先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。
→ 破損の原因になります。

ご使用の前に

- この製品は、背もたれが倒された状態で梱包してお届けしています。ご使用前には、必ず背もたれを起こしてください。
- 冷えきった室内の温度を上げて使用するとき、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

設置場所について


リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体前後のスペースを約50cm以上確保してください。



注意

- 浴室やサウナなど、湿気が多い場所では使用しないでください。
- 床面の水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40℃以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
- タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。


- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cmあたり約2.8 kgの荷重がかかります。

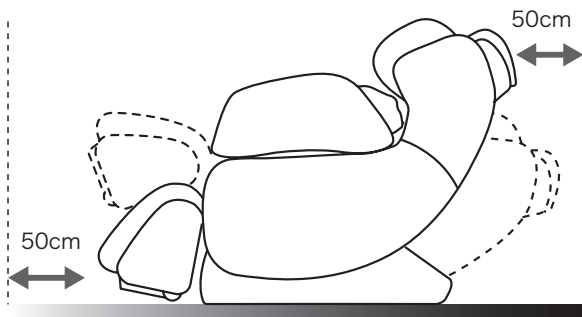

同梱物の確認

梱包箱には本体と同梱物が入っていることを確認してください。

本体

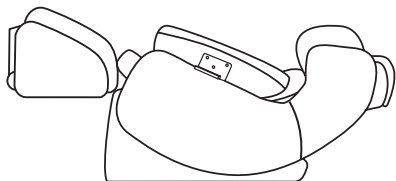

本体

同梱物



取扱説明書(本誌)



電源コード




緩衝パッド




足裏指圧
パッド
強 (L/R)



足裏指圧
パッド
弱 (L/R)

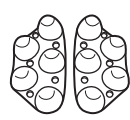

座もみ指圧パッド
(L/R)
(本体に装着しています)

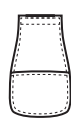


リモコン
ポケット

搬入／移動の仕方

移動の際は、主電源スイッチを切り、電源プラグ及びアース線をコンセントから抜き、電源コードのコネクタもインレットから抜いてください。


キャスターで移動するとき

リクライニングを起こし、フットレストの横を持って前側を浮かせ、キャスターで移動してください。

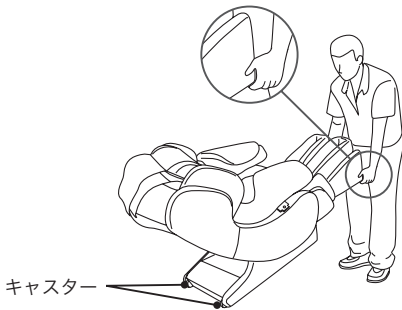

持ち上げて運ぶとき

リクライニングを倒し、裏カバー上部の持ち手とフットレストの横を持って、持ち上げて移動してください。

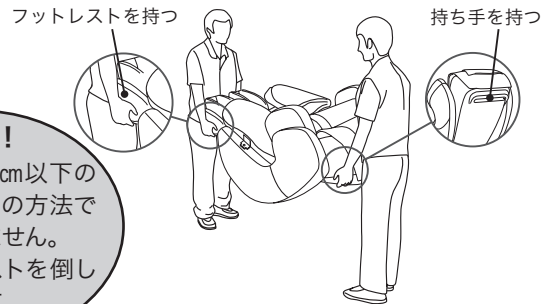

注意！

通路幅が77cm以下の場合、通常の方法では移動できません。
※アームレストを倒した状態です。

床を傷つけるおそれがありますので、マット等を敷いて移動してください。

本体を落とすと床を傷つけたり、ケガをしたりするおそれがありますので、しっかり持ってください。

通常の方法では移動ができない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、運搬用手袋を装着してください。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようにご注意ください。
- リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。

⚠注意

- 人をのせたまま移動させないでください。
- 電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて移動してください。
→ 電源コード、アース線が破損し、火災や感電の原因になります。

アースの取付け方

万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。


①電源コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでないかときどき点検してください。

②電源コンセントにアース端子がない場合


お買い上げの販売店にご相談ください。

電源コードは、必ず本機器に付属のものをご使用ください。とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しないでください。

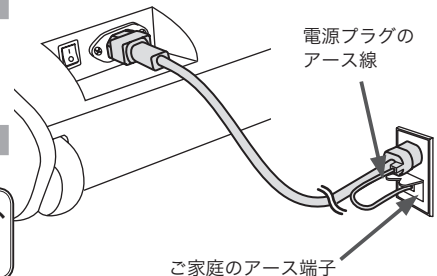


主電源の入れ方

- ① 電源コードのコネクタを本体左後部のインレットに差し込みプラグをコンセントに差し込みます。

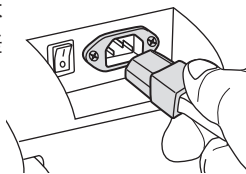

- ② 本体左後部の主電源スイッチを入れます。

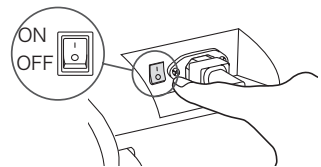

※もみ玉が途中で止まっているとき主電源スイッチを入ると、もみ玉は自動的に収納位置（背もたれ上部）まで移動して停止します。

⚠警告

- 変圧器を用いた使用はしないでください。
→ 故障や感電の原因になります。
- 日本国外では使用しないでください。
→ 故障や感電の原因になります。

⚠注意

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に主電源スイッチが切れていることを確認してください。
- 電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
- ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

ご使用前に

布地の確認

ご使用前には布地の破れがないか確認してください。





●ご使用前には必ず本体布地が破れていないか確認してください。またその他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。本体布地をはずしたり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

リモコンの取り回し方・リモコンポケットの取り付け方

アームレストにリモコンポケットを取り付けることができます。左右どちらでも取り付けることができます。

① アームレストを起こした状態でリモコンポケットをアームレスト裏側のマジックテープにしっかりと取り付けます。

② リモコンをリモコンポケットに差し込み、リモコンコードを下記のように取り回して使用してください。

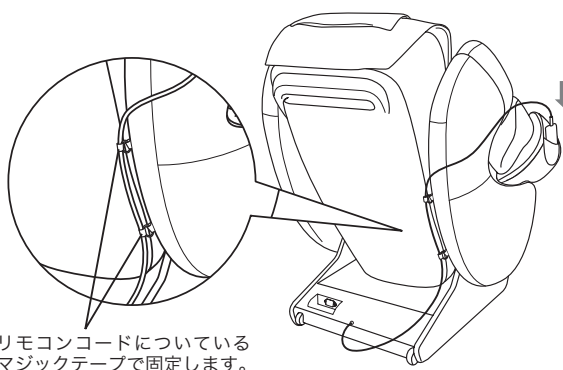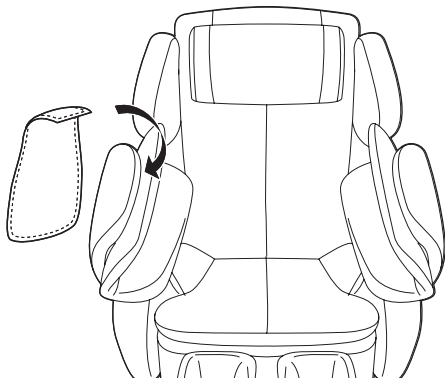

リモコンコードについているマジックテープで固定します。

椅子の調節

椅子の座り方

もみ玉は通常、背もたれの上部に左右に広がって引っ込んだ状態になっています（収納状態）。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にもみ玉がある場合はすぐに座らず主電源スイッチを入れて、もみ玉を収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。





注意

●フットレストを上げたまま椅子に座らないでください。
→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因になります。
●ご使用前は背もたれを完全に起こし、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

椅子への乗り降りの際の注意点

椅子への乗り降りの際、アームレストの上に手を置いて支えないでください。故障の原因になります。アームレストの内側に手を置いて支えながら、乗り降りを行ってください。また、座面に座もみメカがあります。座面の中央に座ってください。

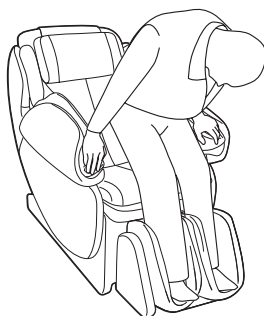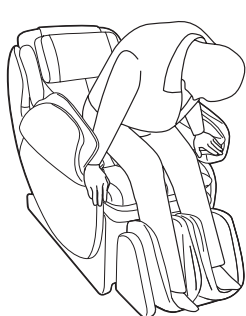

警告

●アームレストの上から強い衝撃をかけないでください。
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。
●座もみメカに強い衝撃をかけたり、すぎまに手を挟んだりしないでください。
→ケガや故障の原因になります。


椅子の調節

アームレストの起こし方

次の手順でアームレストを起こしてください。

①倒れたアームレストを起こしてください。

②ストッパーをスライドさせ、ロックをかけてください。(左右両方おこなってください。安全のため、最後までスライドさせてください。)

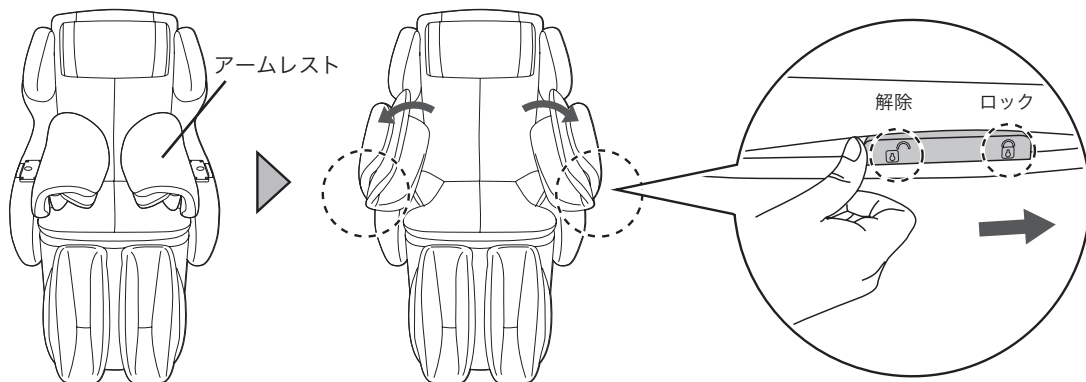

注意

●ロックせずに使用すると、アームレストが不意に倒れるおそれがあります。
→故障やケガの原因になります。

アームレストの倒し方

起こし方の逆の手順で倒してください。



注意


●アームレストの起こし倒し時に、手や指を挟まないように注意してください。
→故障やケガの原因になります。

アームレストの使い方

下の図のようにアームレストと背もたれの間に肘が来るように腕を置いてください。

アームレスト / 背もたれの間に肘を置いてください。

手のひらが下向きになるように入れてください。

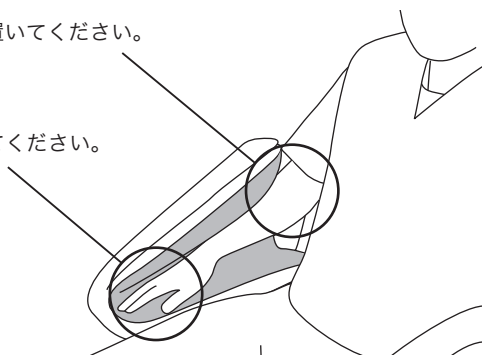


注意

- 腕部以外には使用しないでください。
→ケガの原因になります。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れないでください。
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。
- 肘をマッサージしないでください。また、手のひらが下向きになるようにマッサージしてください。
他の向きで腕を入れないでください。
→ケガの原因になります。

椅子の調節

枕の調節

枕は裏側についているマジックテープで位置を調節することができます。あらかじめ頭の位置に合わせてマッサージを行ってください。

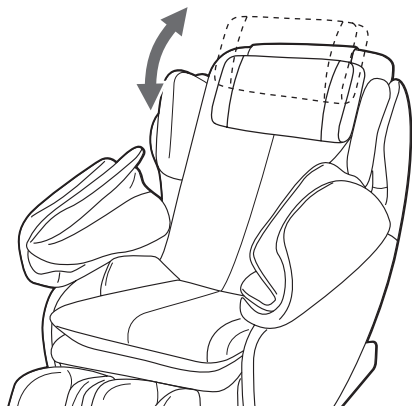

正しい枕の位置



枕のへこみ部分と後頭部がっていない。




枕のへこみ部分に後頭部を置きます。

●枕は正しい位置でご使用ください。位置によっては、自動指圧点検索がうまくいかない場合があります。

緩衝パッドの使い方

マッサージが強いと感じられる場合は、付属の緩衝パッドを背パッドの上に置いてマッサージをおこなってください。

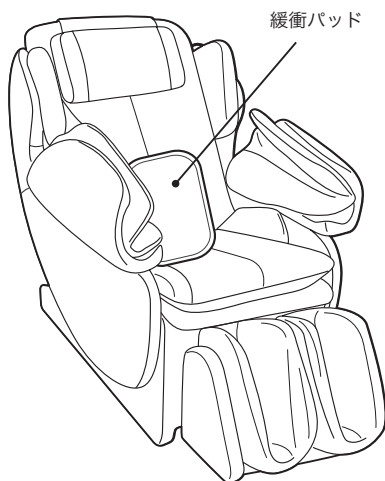

● 緩衝パッドが丸まったり偏ったりしていないことを確認してください。
→故障やケガの原因になります。

足裏指圧パッドの使い方


付属の足裏指圧パッド強、弱を足裏部分においてご使用いただけます。お好みに応じて指圧パッドを選んでご使用ください。

マッサージを弱くしてご使用になりたい方は足裏指圧パッドを取りはずしてご使用ください。


足裏指圧パッド

強 (L/R)

弱 (L/R)

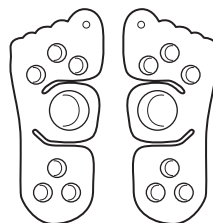

足裏部分

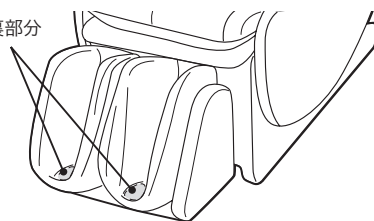



●椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がるときは足裏部分の突起にご注意ください。

座もみ指圧パッドの使い方

付属の座もみ指圧パッドを専用ポケットに入れてご使用いただけます。お好みの位置のポケットに指圧パッドを入れてご使用ください。

マッサージを弱くしてご使用になりたい方は、座もみ指圧パッドを取りはずしてご使用ください。
※ポケットに取り付けた状態でお届けしています。

座もみ指圧パッド (L/R)

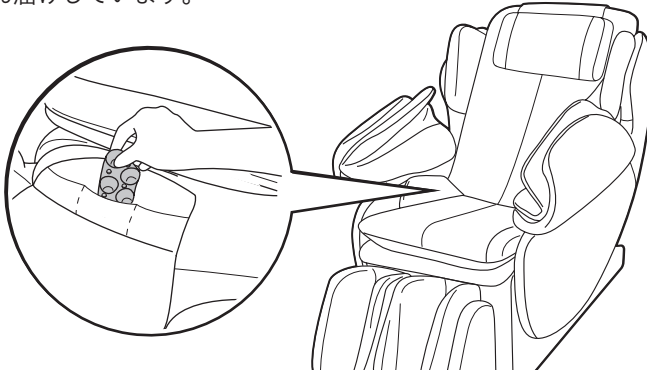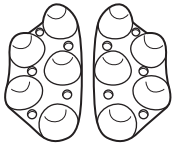




別売り指圧パッドの使い方

このマッサージチェアは、指圧パッド（別売）を取り付けて使用することが出来ます。

※ケガ等の原因になりますので、正規品以外のものを指定外の場所に取り付けて使用しないでください。

肩エア指圧パッド用ポケット

太もも指圧パッド用ポケット

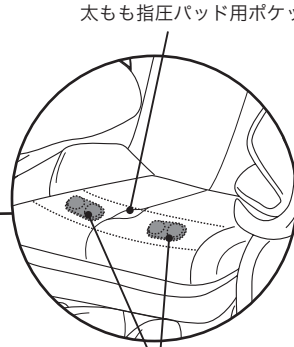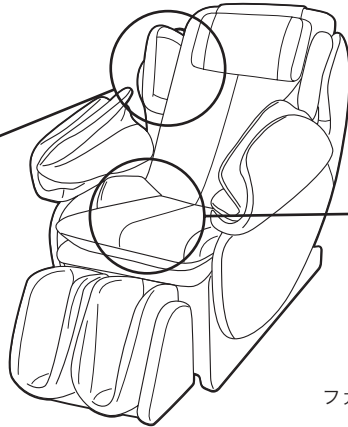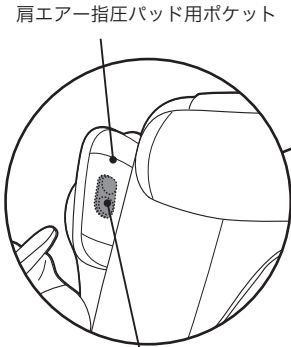


ファミリーイナダ 万能指圧パッド (標準タイプ)

ファミリーイナダ 万能指圧パッド (標準タイプ)

フットレストの使い方

フットレストの伸縮

椅子に座り、フットレストを一定の高さまで上げると自然に伸縮します。

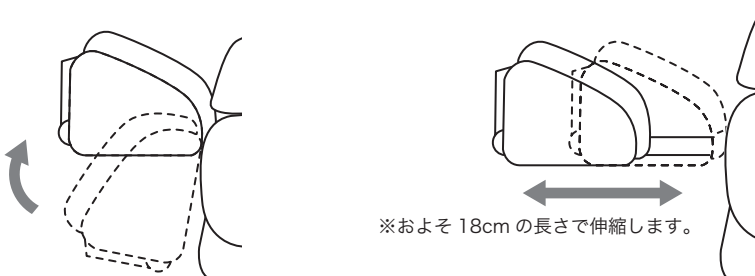

※およそ 18cm の長さで伸縮します。



警告

- フットレストを下げるときは、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、フットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。
- フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。



注意

- 脚部以外には使用しないでください。

椅子の調節

リクライニングの使い方

■背もたれを起こす場合

リクライニングボタンの上側のボタンを押すことで背もたれを起こすことができます。


リクライニング

■背もたれを倒す場合

リクライニングボタンの下側のボタンを押すことで背もたれを倒すことができます。

リクライニングの可動範囲

リクライニングは背もたれとフットレストが連動して上下動作します。

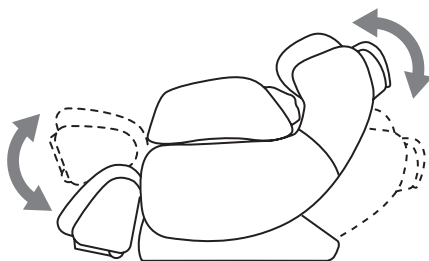

長押し機能

ボタンをおよそ2秒間長押しするとリクライニングの上昇(下降)動作を最大まで動作後、自動で停止します。

途中で止める時は再度ボタンを押してください。



警告

●背もたれを倒すときは、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。

ヒーターの使い方

■ボタンを押してON/OFFを切りかえることができます。

ヒーターボタンを押すとランプが点灯し、手元および座面ヒーターが入ります。

(約15分で停止)

※ただし、コース途中でヒーターボタンを押すとヒーターはコース終了と同時に停止します。

ヒーター

使い終わったら

周囲に注意しながら、リクライニングを最大まで起こして、本体左後部の主電源スイッチを切りましょう！



注意

- 使用後は必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 使用後は、必ず背もたれを完全に起こし、フットレストを完全に下ろしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- コード類に引っかかって転倒しないようにしてください。

コースの種類と特長

自動コース

あらかじめ設定されたメニューにより、目的・用途に応じたコースが簡単に選べます。

メディカルコース

筋肉の疲労回復を目的としたコースです。

全身コース

首から脚まで全身をマッサージするコースで、全体的に身体が疲れている人におすすめです。

首・肩集中コース

首・肩の周辺を集中してマッサージするコースで、首から肩・肩甲骨周辺にかけて疲れている人におすすめです。

腰集中コース

腰周辺を集中してマッサージするコースで、腰が疲れている人におすすめです。

姿勢のばしコース

リクライニング動作とマッサージ機能を組み合わせて、背すじをもみほくしながら上半身を中心に伸ばします。

求心コース

身体の末端から血流を心臓に送り返す求心法でマッサージします。身体をリフレッシュしたいとき、身体を目覚めさせたいときにおすすめです。

遠心コース

心臓から血流を身体の末端へ促す遠心法でマッサージします。身体をリラックスさせたいとき、おやすみ前におすすめです。

お好みコース

お好みの機能を選ぶことができます。また、エアーの強さや上下調節等、マッサージ動作の調節もおこなえます。

自動コース

自動コースでのマッサージ

- 疲労の回復、改善等を目的とした6種類のコースを用意しています。
- 各コースボタンでお好みのコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージをおこないます。

⚠注意

- 自動コースはコース選択時にリクライニングが自動で倒れる場合があります。
→ご使用前には後ろに人や障害物がないことを確認してください。また、使用中に人が近づかないようご注意ください。

操作方法

① 「入/切」ボタンを押します。

5分間入力がなければ自動的に電源が切れて、オレンジのランプが点灯します。

② お好きなコースのボタンを押します。

リクライニングが動きます。

その後、指圧点の検索中のランプが点灯し、指圧点の検索をおこないます。

選択したコースのランプが点灯します。

【お願い】

深く椅子に腰かけ、楽な姿勢で枕に頭を置いてください。
体が浮いていると正確に指圧点を検索できません。



③ 肩位置調節ができます。

指圧点検索後、検索中のランプが点滅します。

点滅している間、肩の位置を調節できます。

調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。

④ コースが始まります。

指圧点の検索が完了すると、検索完了のランプが点灯し、コースが始まります。

コース動作中はエアの強さ調節ができます。



⑤ コースが終了します。


もみ玉が収納位置(背もたれ上部)まで戻ります。


その後リモコンの電源が切れますが、リクライニング、フットレストの上下調節はご使用になれます。

肩位置の調節

肩位置が合っていないときはもみ位置調節ボタンで肩位置を調節してください。

	▲	押している間もみ玉が上に動き続けます。
	▼	押している間もみ玉が下に動き続けます。

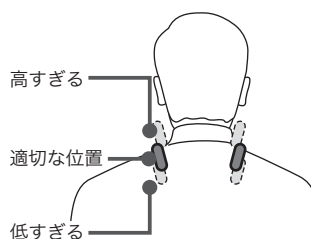

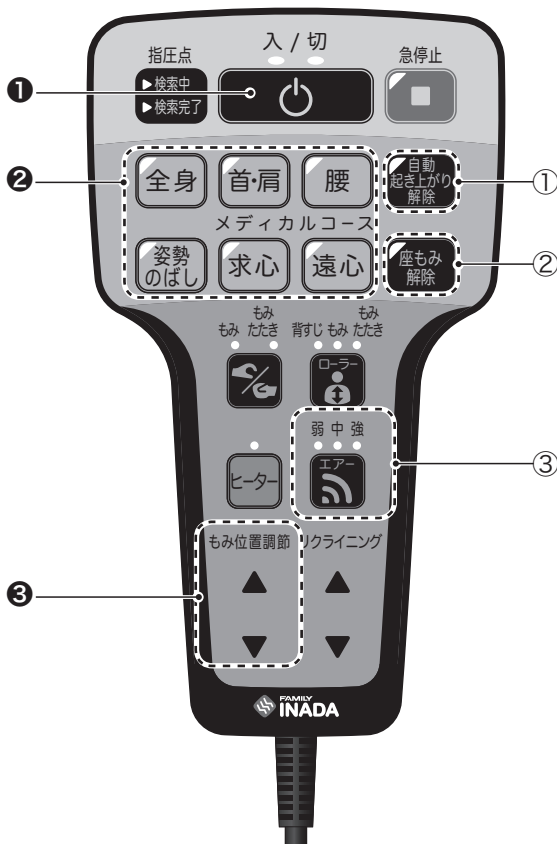

①自動起き上がり解除



自動コース終了時にリクライニングが起き上がらないようにできます。

②座もみマッサージの解除



自動コース中の座もみマッサージを解除することができます。

③エアーマッサージの強さ調節と解除



エアーマッサージの強さ調節をおこなうことができます。
ボタンを押すごとに弱⇒中⇒強⇒切の順に切りかえることができます。(コース開始時は中に設定されています。)

コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切りかえられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

自動コース→自動コース

自動コース実行中に他の自動コースボタンを押すと、もみ玉が一度検出した肩位置に戻り、肩位置の再確認をおこなってから開始します。肩位置再確認中は、肩の位置を調節できます。

自動コース→お好みコース

自動コース実行中に手動コースのボタンを押すと、押した時点で自動コースは中断し、選択した動作が開始します。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に[入/切]ボタンを押してください。もみ玉が収納状態に戻った後、停止します。
緊急時や動作中に**異常を感じたとき**は、[急停止]ボタンを押してください。その場で動作が停止します。安全確認後、[入/切]ボタンを押してください。もみ玉が収納状態に戻った後、停止します。
動作停止後、[リクライニング]ボタンでリクライニングを起こしてください。




注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)にご相談ください。
→強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。
- また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
- 座部のマッサージ中に座もみからずれた場合、無理に戻さないでください。
→無理に戻そうとすると、故障の原因になります。
- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

お好みコース

お好みコースの動作説明

お好みのマッサージメニューを選択できます。また、①と③を組み合わせることができます。

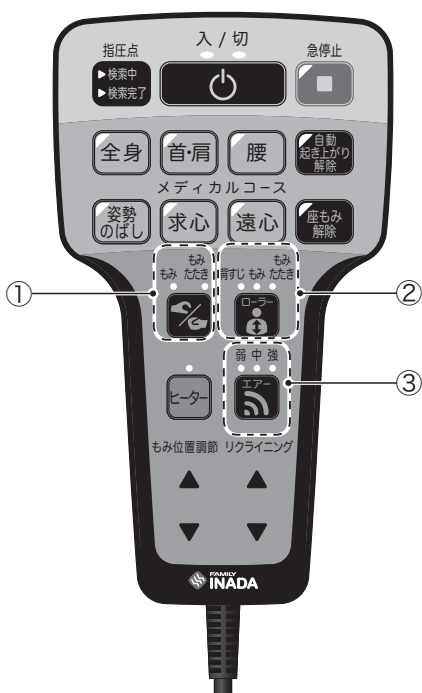

①基本動作

ボタン	内容
	もみ、もみたたきをおこないます。 ボタンを押すごとにもみ⇒もみたたき⇒切を選ぶことができます。 選択した動作のランプが点灯します。

②ローラー

ボタン	内容
	上下運動での背すじ伸ばしをおこないます。 背すじ⇒もみ⇒もみたたき⇒切を選ぶことができます。 選択した動作のランプが点灯します。

③エアーマッサージ


ボタン	内容
	エアーのマッサージをおこないます。 ボタンを押すごとに弱⇒中⇒強⇒切を選ぶことができます。 選択した強さのランプが点灯します。

もみ玉の位置の調節

	もみ / もみたたきを選択している時 マッサージしたい位置にもみ玉の位置を調節できます。	▲	押している間、もみ玉が上に動き続けます。
		▼	押している間、もみ玉が下に動き続けます。
	ローラーを選択している時 上昇と下降が切りかわります。	▲	下降中に押すと上昇に切りかわります。
		▼	上昇中に押すと下降に切りかわります。

●もみ玉の位置が最上部(最下部)にあるときに、さらに上昇(下降)を選択すると「プププ」と警告音が鳴ります。

操作方法

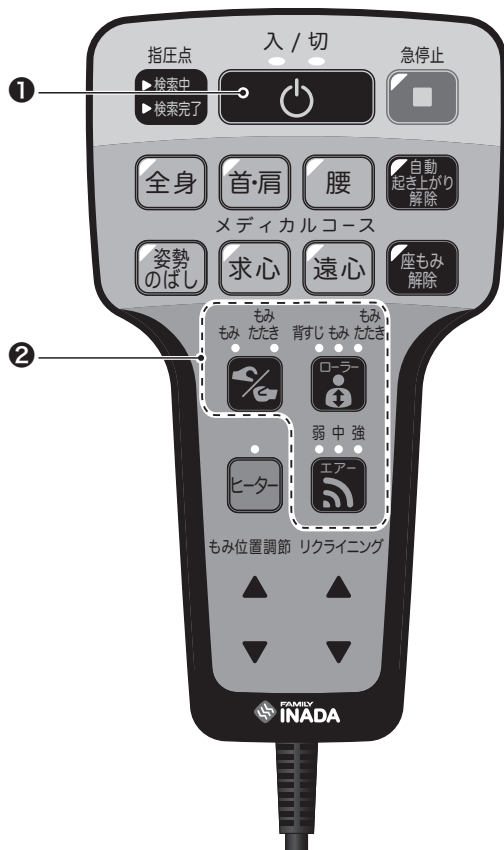

① 「入/切」ボタンを押します。

5分間入力がなければ自動的に電源が切れて、オレンジのランプが点灯します。

② お好きなマッサージのボタンを押します。

もみ/もみたたき、ローラー、エアーマッサージの中から好みの動作を組み合わせでお選びください。

③ コースが始まります。

コース動作中でも基本動作の変更やエアーの強さの調節ができます。

④ コースが終了します。

もみ玉が収納位置(背もたれ上部)まで戻ります。その後リモコンの電源が切れますが、リクライニング、フットレストの上下調節はご使用できます。

お好みコースの指圧点検索について

ローラーを選択すると、動作を一時中断し、指圧点検索をおこないます。
(一度でも指圧点を検索している場合、検索はおこないません)

コース変更

お好みコース→自動コース

お好みコース中に他の自動コースを選ぶことができます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に[入/切]ボタンを押してください。もみ玉が収納状態に戻った後、停止します。

緊急時や動作中に**異常を感じたとき**は、[急停止]ボタンを押してください。その場で動作が停止します。

安全確認後、[入/切]ボタンを押してください。もみ玉が収納状態に戻った後、停止します。


動作停止後、[リクライニング]ボタンでリクライニングを起こしてください。

⚠注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』(裏表紙に記載)にご相談ください。
→強い刺激のまま使用続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。
また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。
- 腕部のマッサージ中にアームレストから腕が抜けた場合、無理に腕を入れないでください。
- 脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
- 座部のマッサージ中に座もみからずれた場合、無理に戻さないでください。
→無理に戻そうとすると、故障の原因になります。
- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くの『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までご相談ください。

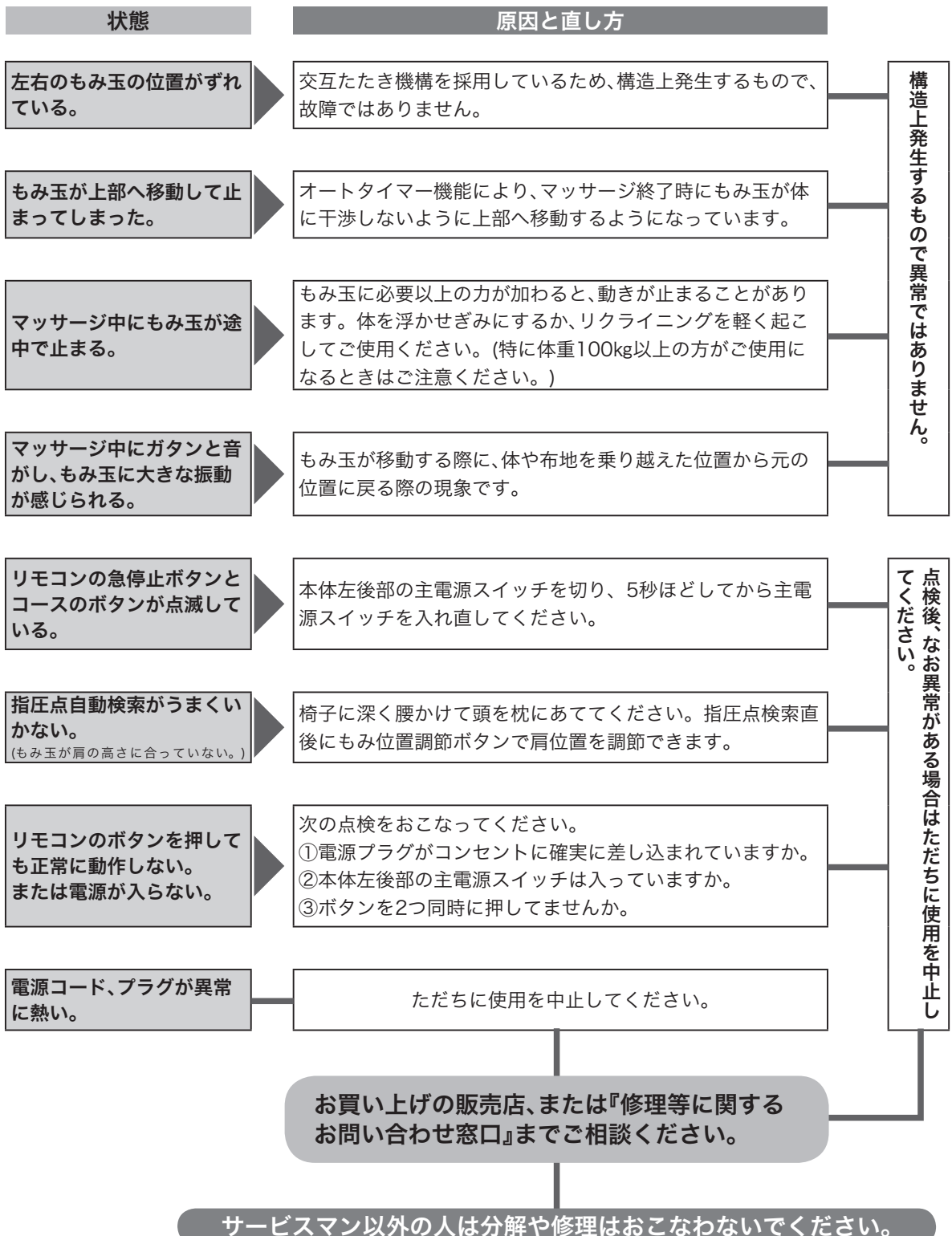

動作時の音

構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音	ゴトゴト音
もみ動作時のもみ玉と布のすれる音	キュッキュッ音 ギューギュー音
もみ玉の昇降、もみ動作時の音	ウィーン音 ゴロゴロ音 コトッ音
エアーマッサージ中の音	コツコツ音
エアーポンプの音	ブーン音
エアーの排気音	シュー音
リクライニング昇降時の音	ウィーン音

※上記の音について、性能等に影響はありません。

【故障かな？と思ったら】

安全のために商品の点検を

長期で使用的場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店または、『修理等に関するお問い合わせ窓口』に点検をご依頼ください。

愛情点検



安全にお使いいただくために

本体布地（もみ布）は消耗品であり、耐用年数は3年です（使用条件：1日15分コースを2回、毎日使用した場合）。安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』に定期点検をご依頼ください。

※ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

※お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

【安全のために商品の点検を】

Q ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

A 火災のおそれがありますのでホットカーペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を痛め、そこから発火するおそれがあります。

Q マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？

A 次のことをおこなってみてください。

[背中マッサージ時]

- 背もたれを起こす。
- 背パッド上に緩衝パッドを置く。

[座もみマッサージ時]

- 背もたれを倒す。
- 座もみ指圧パッドを取りはずす。

[足裏マッサージ時]

- 足裏指圧パッドを取る。

以上の方法でより弱くマッサージをおこなうことができます。

Q フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

A 設置しても大丈夫です。

ただし、床を傷つけることがあるかもしれませんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをお勧めします。(畳等も同様です)

Q 体重が重くても大丈夫ですか？

A 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。

体重100kg以上の方がご使用になる場合は、少し体を浮かせぎみにしてご使用ください。

Q マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

A 次のことをおこなってみてください。

[背中マッサージ時]

- 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。

- 背もたれを倒す。
- 背パッド上の緩衝パッドを取る。

[座もみマッサージ時]

- 深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。

- 背もたれを起こす。
- 座もみ指圧パッドを入れる。

[足裏マッサージ時]

- 足裏指圧パッドを置く。

以上の方法でより強くマッサージをおこなうことができます。

Q コースが終了したときに起き上がるリクライニングを止めることができますか？

A 止めることができます。

「自動起き上がり解除ボタン」を押すことでコース終了時の自動起き上がり動作をおこなわないようにすることができます。

Q 身長が150cm未満の人や180cm以上の人も使えますか？

A お使いいただけます。

指圧点検索の際に肩位置が合わない場合がありますので、以下の方法でご使用することをおすすめします。

- 身長の低い人…リクライニングを起こす
- 身長の高い人…リクライニングを倒す
- 指圧点検索後に肩の位置を調節する。

Q 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

A 感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。

- 本体左後部の主電源スイッチを切ってください。
- 電源プラグをコンセントから抜く。

以上のことをおこなった上、お買い上げの販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

Q 1ヶ月の電気代はいくらですか？

A 1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヶ月で約21円です。

27円/kwで計算した場合。ご契約地域や条件により変動する場合がございます。
(2014年11月現在 当社調べ)

保管とお手入れの仕方

保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。



●直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

お手入れの仕方



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

【背パッド・各カバーのお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。



●ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【リモコンのお手入れ】

リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

【その他のプラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

適しているもの	適していないもの

【アフターサービスについて】

販売名		ファミリーメディカルチェア ダブル・エンジン ユニバーサル FDX-WU110
使用電源		AC100V
定格消費電力		102W（ヒーター使用時） ヒーターのみの定格消費電力 24W
定格周波数		50-60Hz
定格時間		30 分
電撃に対する保護の形式		クラス 0 I 機器
上半身	もみ速さ	最小約 5 回 / 分、最大約 18 回 / 分
	たたき速さ	最小約 220 回 / 分、最大約 500 回 / 分
	上下移動速さ	約 26 秒で 1 往復（最小約 3.2cm/ 秒 最大約 4.0cm/ 秒）
	マッサージ範囲	約 76cm
座面メカもみ速さ		最小約 6 回 / 分、最大約 17 回 / 分
自動コース		メディカルコース：6 種類
お好みコース		6 種類（一部自動指圧点検索機能付き）
エア圧力		約 30kPa
オートタイマー		約 15 分（自動コース時は異なります）
フットレスト調節範囲		約 18cm
リクライニング角度		水平面に対して約 120° ～ 約 165° 無段階（電動リクライニング）
本体の寸法		幅約 82cm× 奥行約 132（177）cm× 高さ約 98（67）cm 奥行・高さの（ ）内の数字は最大リクライニング時
重量		約 68kg
外装布地		合成皮革
付属品		電源コード・緩衝パッド・リモコンポケット・足裏指圧パッド強（L/R）・足裏指圧パッド弱（L/R）・座もみ指圧パッド（L/R）
包装		1 梱包 /1 台
類別		機械器具（77）パイプレーター
一般的名称		家庭用電気マッサージ器（JMDN コード 34662000）管理医療機器
医療機器製造販売業許可番号		31B2X00003
医療機器認証番号		226AKBZX00133000
製造販売元		ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220 番地
製造元		ファミリーイナダ株式会社

〈キリトリ線〉

保証規定

- 保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。
 - ・修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
 - ・お買い上げの販売店に修理がご依頼にならない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294) にご連絡ください。
 - ・ご転居の場合やご贈答品等で本保証書に記入のお買い上げ店で無償修理をお受けにならない場合には、『修理等に関するお問い合わせ窓口』(0120-772-294) にご相談ください。
 - ・この商品は、出張修理させていただきますので、修理に際し、本書をご提示ください。
- 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - (1) お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
 - (2) 火災・天災・異常電圧等による故障・損傷の場合
 - (3) 機器を改造や修理された場合
 - (4) 取扱説明書に記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって発生した故障・損傷の場合
 - (5) 本保証書を提示されない場合
 - (6) 本保証書のお買い上げ店名、およびお買い上げ年月日の未記入あるいは字句を訂正された場合
 - (7) 一般家庭以外(業務用等) でご使用されていた場合
- 本保証書は日本国内において有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書を参照ください。
- 本保証書の記載内容については『修理等に関するお問い合わせ窓口』(取扱説明書に記載) にご相談ください。

修理メモ

※This warranty is valid only in Japan

〒532-0004
大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
ファミリーナダ株式会社
電話 06-4807-9111 (代)

【お問い合わせ窓口・保証書】

製品に関するお問い合わせ窓口
0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口
0120-772-294

土・日・祝を除く平日9:00～17:00

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員
健康空間を創造する



ファミリーチャア株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3(ソーラ新大阪21 14階)

<http://www.family-chair.co.jp>

2014年11月 1日(第1版) 778804200

〈キリトリ線〉

ファミリーチャア マッサージ器保証書

品番	FDX-WU110		製造番号	
お客様様	お名前 様			
	ご住所 -			
	電話 ()			
お買い上げ店名 住所・電話番号				
お買い上げ日			保証期間	1年間
			保証対象	本機

- 正常なご使用状態(取扱説明書に記載)で万一発生した故障については、お買い上げ日から上記の期間、裏面の保証規定により、その故障の修理料金を無償といたします。
- 本保証書は、本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 製造番号は、取扱説明書をご参考になし、かならずご記入ください。
- お買い上げ時の領収書またはお買い上げ証明書は、本書にかならず貼り付け、大切に保管してください。