

設置説明書

開梱と設置作業をおこなわれる方へ

本書は、本製品の搬入後、設置するまでの作業について説明しています。作業を安全に正しくおこなうために、必ず本書の手順に従ってください。また、本書が入っている梱包箱には、以下のものが同梱されています。そろっているか確認してください。作業終了後は、いつでも見られるように大切に保管してください。なお、下記URLから作業手順を動画で見ることができます。パソコンもしくはスマートフォン、タブレット等からアクセスしてご覧ください。 <https://family-owner.com>




同梱物の確認

梱包箱に、以下の同梱物が入っていることを確認してください。

この製品は、**本体**と**同梱物**の1梱包です。

1
1

本体

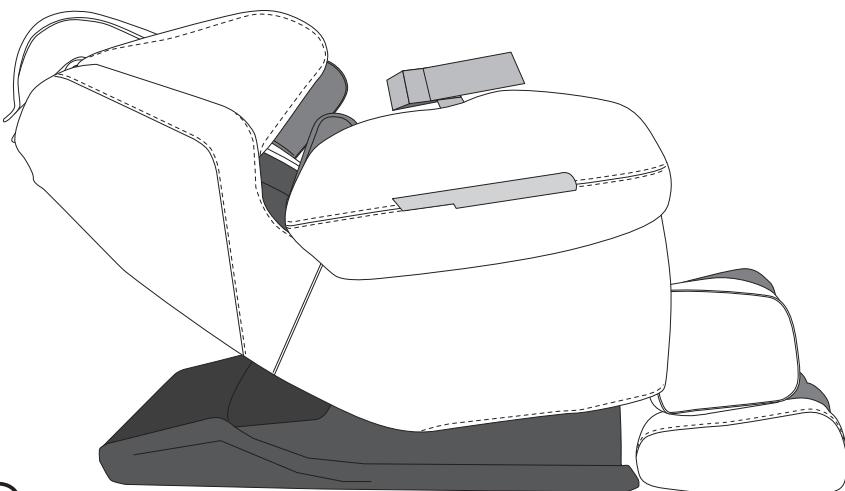

同梱物

タブレット 	タブレットバックカバー 	タブレットカバー用プッシュターンリベット×2 	タブレット取り付け用ネジ×2 	T型レンチ 	指圧パッド
電源コード 	イヤホン 	脈拍センサー 	取扱説明書 	設置説明書(本書) 	オーナーズカード 会員サービス規約登録ハガキ プライバシー保護シール

設置手順について

本製品は、下記の手順で設置・取り付けをおこなってください。

1. 設置場所の確認、搬入
2. 梱包を解いて、背パッドを取り付ける
3. タブレットの取り付け
4. 電源コードの取り付け

- 重量物ですので作業時は、ケガ等しないように作業用手袋を装着してください。
- 取り付け作業は、2人以上でおこなってください。


設置場所について

設置場所の確認

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後ろのスペースは35cm以上、本体前のスペース

は40cm以上確保してください。

本体の下にマットなどを敷いてください。

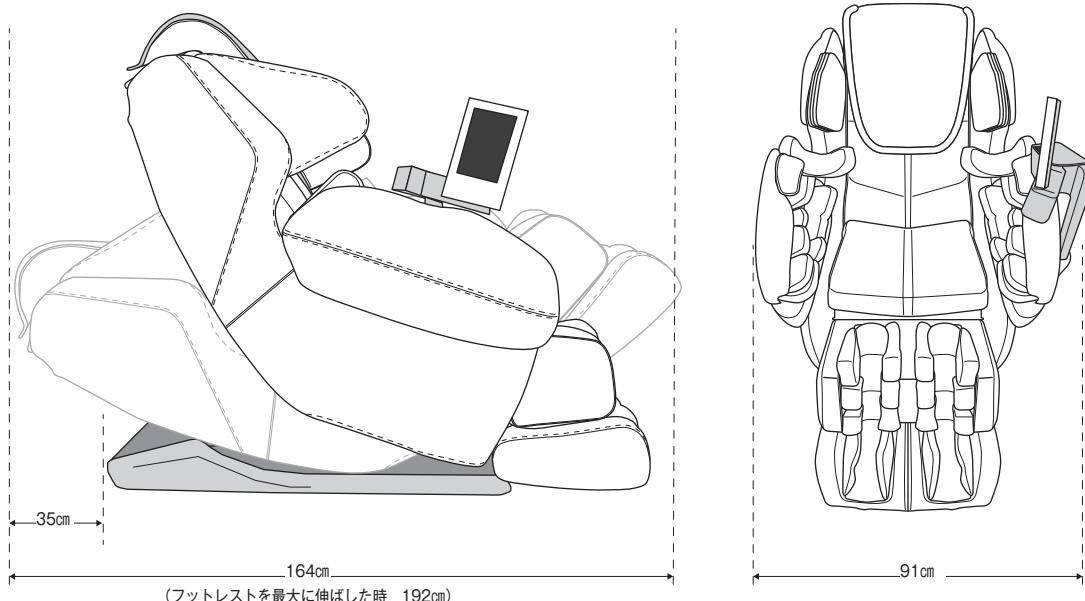

- 床面の傷つき防止や動作中の音をやわらげるためにも本体下にマットなどを敷いてください。

(ホットカーペットは敷かないでください。)

- 重量物ですので、下ろすときは床面を傷つけないように注意してください。

- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。

- 体重100kgの人が座った状態で1㎠あたり約1.2kgの荷重が床面にかかります。

注意

- 浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 床面が水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40°C以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。


搬入/移動の仕方

設置後の移動の仕方

移動の際は、主電源スイッチを切り、電源プラグ及びアース線をコンセントから抜き、電源コードのコネクタもインレットから抜いてください。

アームレストの折りたたみ方



アームレストの中央下にあるボタンを押して、内側に折りたたんでください。

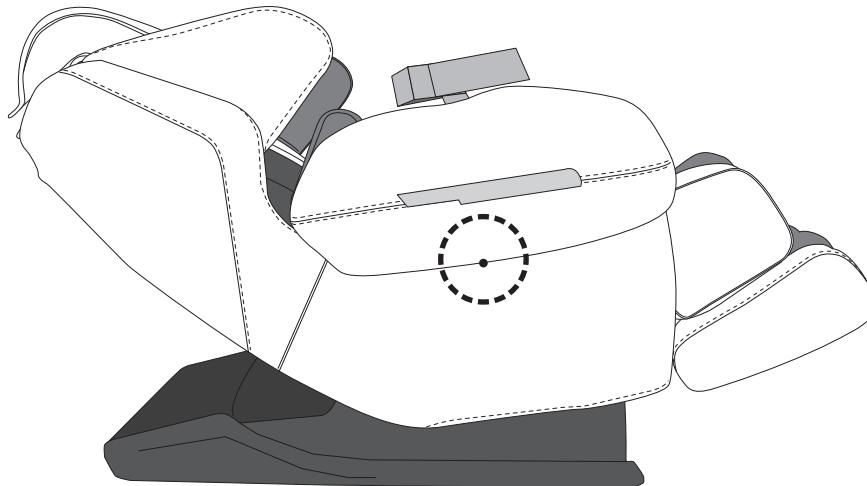

持ち上げて移動するとき

リクライニングを倒し、タブレットを取り外したあとにアームレストを折りたたみます。マジックテープバンドでアームレストを固定させてください。

マジックテープバンドはアームレストの隙間に通してとめてください。

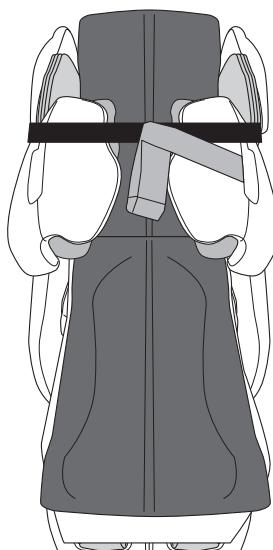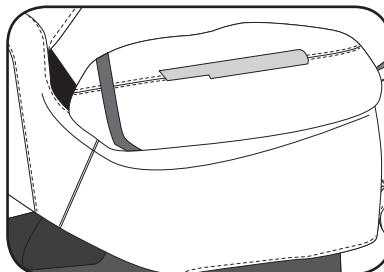

- 通路の巾は、約77cm必要です。
- 重量物ですので搬入移動時に、製品を落としたり、ケガ等しないよう、運搬用手袋を装着してください。
- 重量物ですので搬入移動時には腰等を痛めないようにご注意ください。
- 本体を落とすと床を傷つけたり、ケガをしたりするおそれがありますので、しっかり持ってください。

通常の方法では搬入／移動ができない場合は、アームレストを取りはずしてください。

△注意

- 人をのせたまま移動させないでください。
- 電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて移動してください。
→電源コード、アース線を破損し、火災や感電の原因になります。

本体は、約100kgありますので、十分注意して移動してください。

4人で運ぶ場合


アームレスト下部を4箇所もち、バランスを保ちながら、持ち上げて移動してください。
場合によっては、アームレスト及びフットレストを取り外してから移動してください。

2人で運ぶ場合


背もたれ裏側の持ち手とフットレスト下部を持ち、
移動してください。
場合によっては、アームレスト及びフットレストを取り外してから移動してください。

背もたれ裏側にあるファスナーを開くと持ち手があります。

- 作業後は、ファスナーを閉じてください。

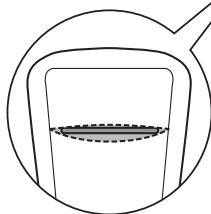

4人でアームレスト下部をお持ちください

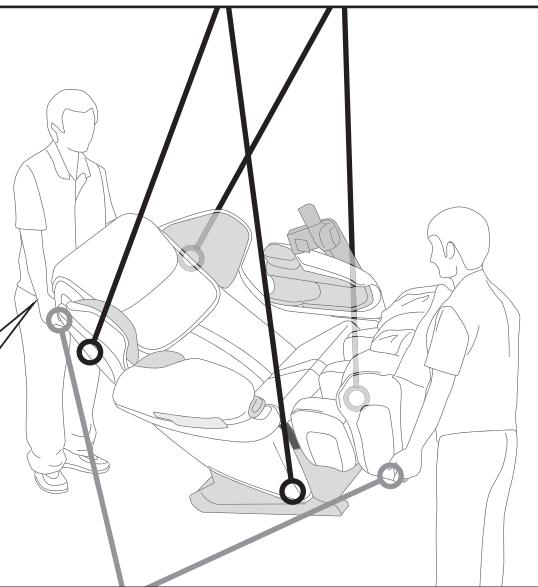


2人で背もたれとフットレスト下部をお持ちください






アームレスト、フットレストを取り外してから運ぶ場合

横方向から持つと、グリスで汚れる可能性がありますので、背もたれ裏側の持ち手と本体の前面下部を持ち、移動してください。

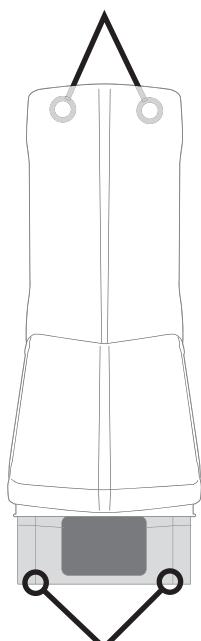

立てて運ぶ場合

アームレスト、フットレストを取り外してください。グリスで汚れる可能性がありますので、注意してください。
本体の穴とキャスターの下部を持ち、バランスを保ちながら持ち上げて移動してください。

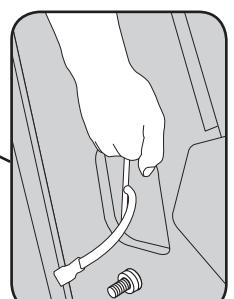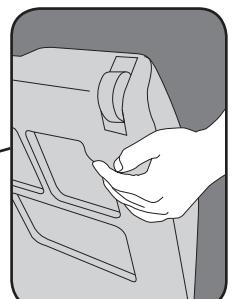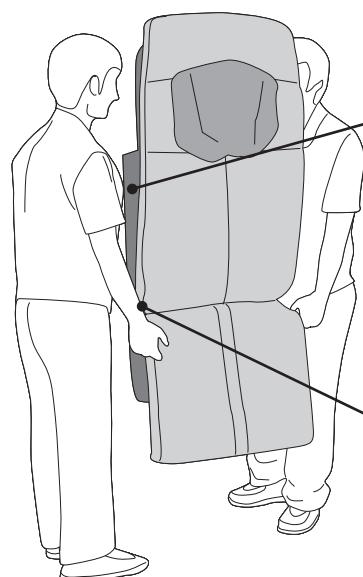


アームレストは、左右で約26kg
フットレストは、約20kgです。

梱包を解いて、背パッドを取り付ける


本製品は背パッドとアームレストが、折りたたまれた状態で梱包されています。

①まず始めにマジックテープバンドを外します。


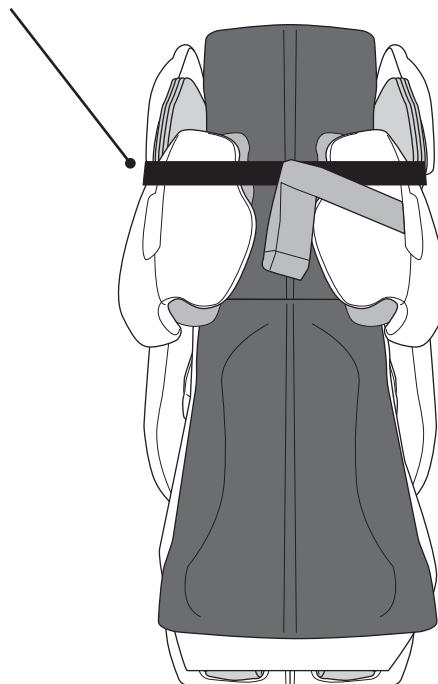


②アームレストを起こします。


手をはさまないように気をつけ、カチッと音が鳴るまで完全に起こしてください。

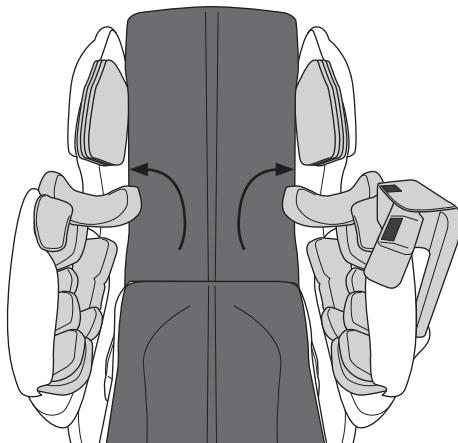

③折りたたまれている背パッドを広げ、背パッドと本体のファスナーを合わせて閉じてください。閉じる箇所は、背パッド上部
①・右下部②・左下部③の3箇所です。

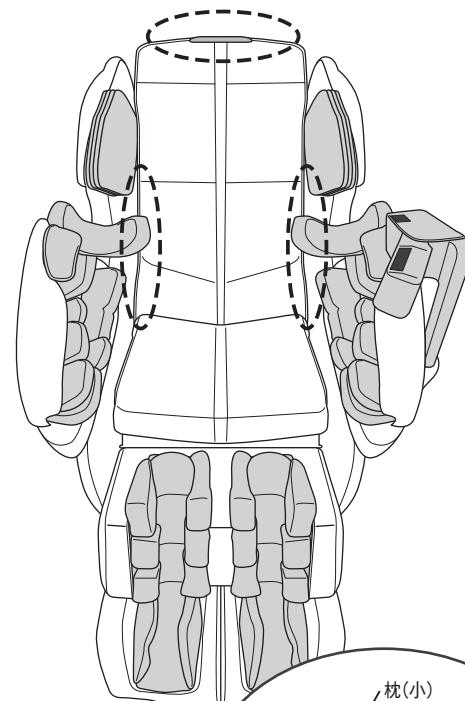
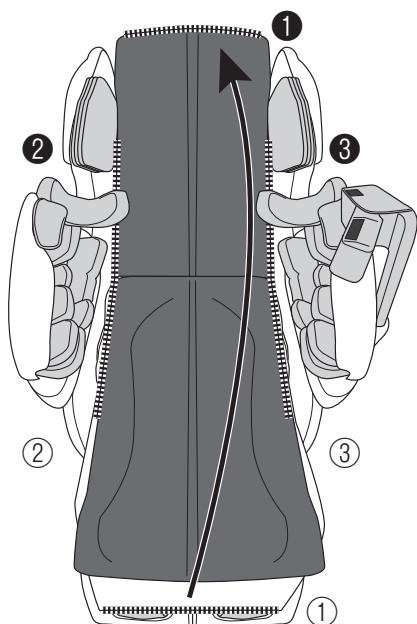


④枕(大)と枕(小)をマジックテープで取り付けてください。

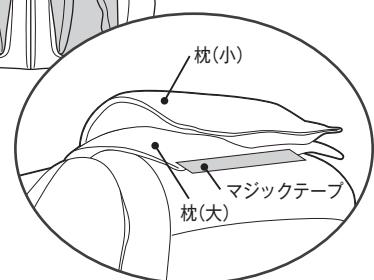


タブレットの取り付け方法

①タブレットスタンドから、テープ付けされているタブレットスタンドカバーを外します。

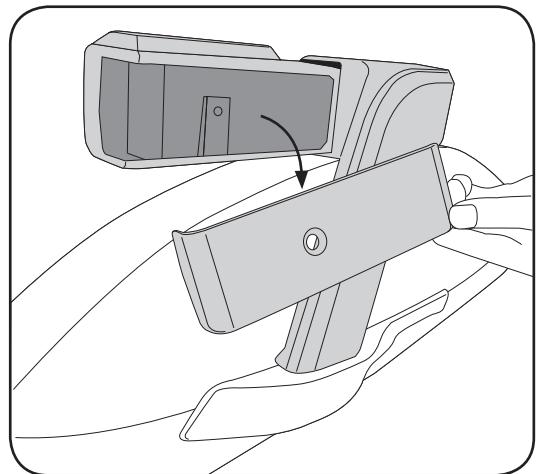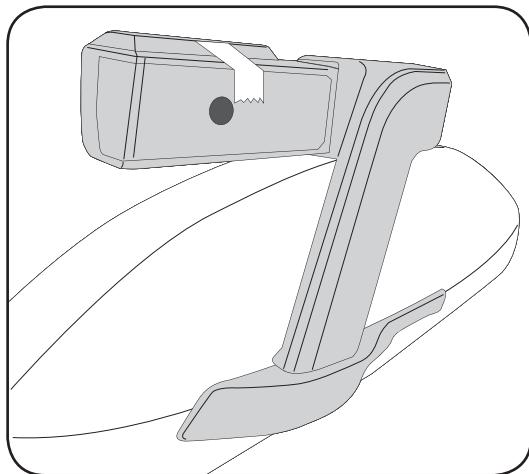


②タブレットの下部から出ているコネクタを、タブレットスタンドの隙間の穴に通します。


③タブレットを傾けながら、タブレット背面についているツメをタブレットスタンドのへこみにスライドさせるように引っかけ、取り付けます。

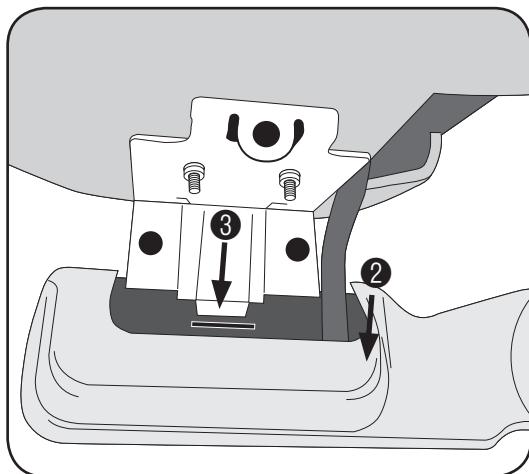


④取り付けネジを使い、付属のT型レンチで、タブレットを2箇所固定してください。

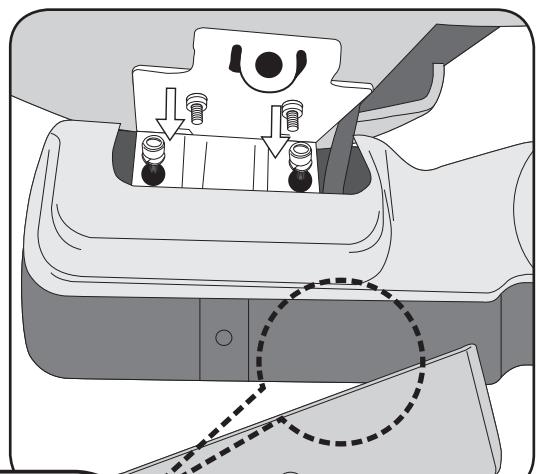


⑤タブレットスタンドのすきまを通したコネクタに付いているプッシュマウントをタブレットスタンドの穴に押し込み、その後コネクタを取り付けます。

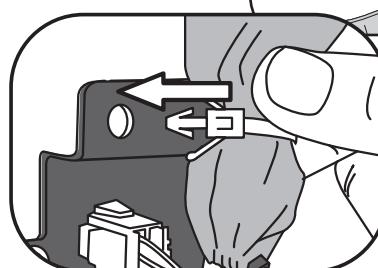

⑥タブレットスタンドカバーのツメをタブレットスタンドの右側に引っかけ、タブレットカバー用プッシュターンリベットを使い、取り付けます。

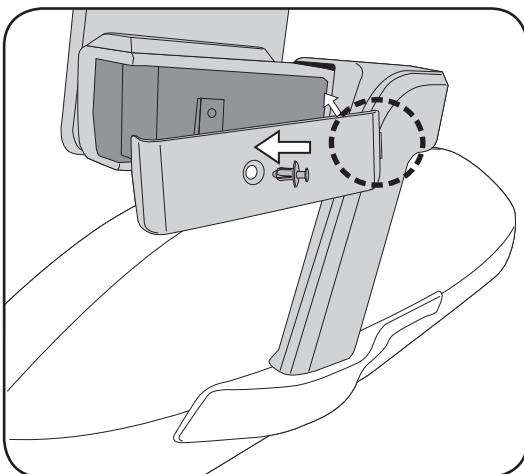

⑦タブレットバックカバーを上から差し込み、タブレットカバー用プッシュターンリベットで固定します。

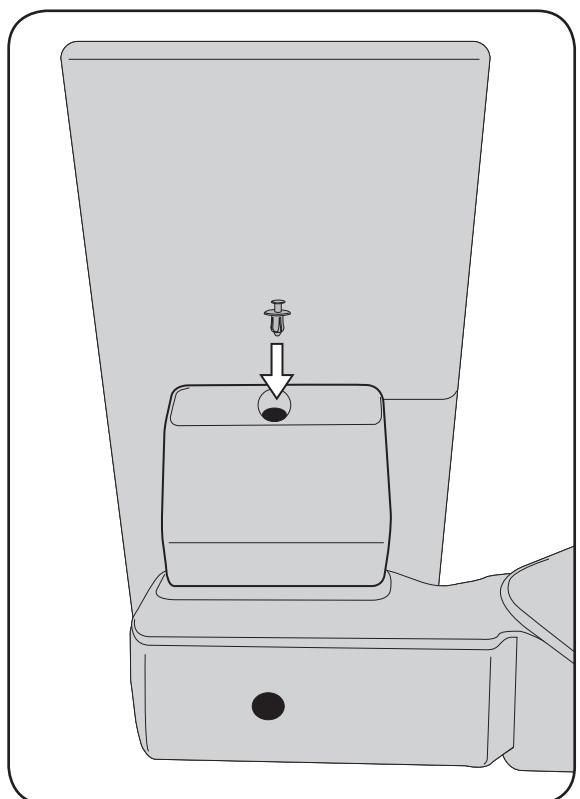


※取り外しの際は、本手順と逆の手順でおこなってください。

※プッシュターンリベットを取り外す際は、お手持ちのプラスドライバーをお使いください。

⚠ 注意

- タブレットの取り付けを行う前に主電源スイッチが「切」になっていることを確認して、電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて作業してください。
→電源コード、アース線を破損し、火災や感電の原因になります。
- タブレット画面に強い力を加えないでください。故障の原因になります。
- タブレットスタンドに強い衝撃をあたえたり、寄りかかったりしないでください。
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。

電源コードの取り付け方

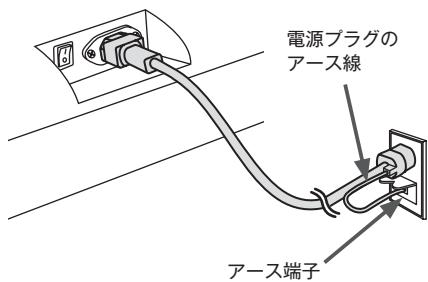

アースの取り付け方

万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。


- ① 電源コンセントにアース端子がある場合
電源プラグから出ているアース線を電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでいないか、ときどき点検してください。
- ② 電源コンセントにアース端子がない場合
『製品に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

●電源コードは、必ず本機器に付属のものをご使用ください。


●とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しないでください。

電源の入れ方

- ① 電源コードのコネクタを本体後部のインレットに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

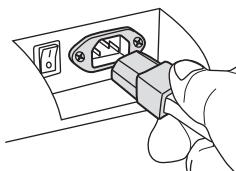

- ② 本体後部の主電源スイッチを「入」にします。このとき、タブレット表示部に文字が表示されます。

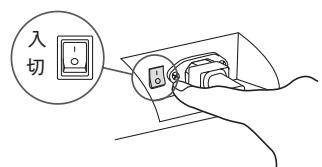

- タブレット画面が表示されるまで約1分程度かかる場合があります。

※もみ玉が途中で止まっているとき主電源スイッチを「入」にすると、もみ玉は自動的に収納位置(背もたれ上部)まで移動して停止します。

警告

- 変圧器を用いた使用はしないでください。
→ 故障や感電の原因になります。
- 日本国外では使用しないでください。
→ 故障や感電の原因になります。


注意

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、主電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。
- 電源プラグおよびコネクタは確実に最後まで差し込んでください。

アームレストの取り外し方


本手順は、通常の方法で搬入／移動ができない場合のみ、おこなってください。

- ①アームレストカバーのファスナーを開け、アームレストカバーをめくり上げます。

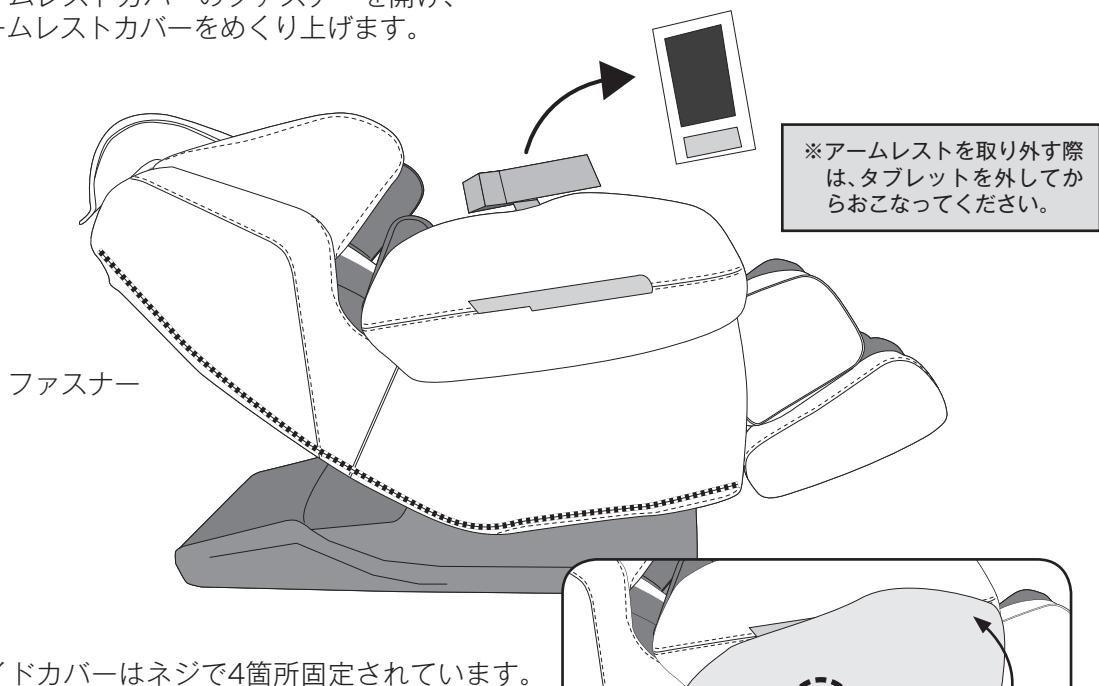


- ②サイドカバーはネジで4箇所固定されています。プラスドライバー#2を使ってネジを外してください。

プラスドライバーは付属していませんので、お手持ちのものをお使いください。(外したサイドカバーを取り付ける際は、引っ掛け用ネジに引っかけてから、ネジで4箇所固定してください)

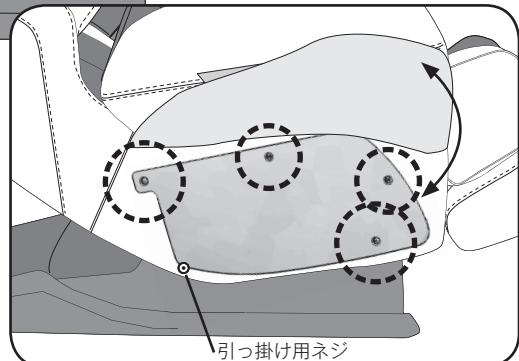


- ③本体とアームレストを接続しているエアホースをエアホースコネクタの銀色部を押しながら外してください。コネクタは、ツメを押しながら外してください。左側はコネクタ2本とエアホース1本、右側はコネクタ1本、エアホース1本があります。取り付けの際は、色と向きに注意してください。


【右側】

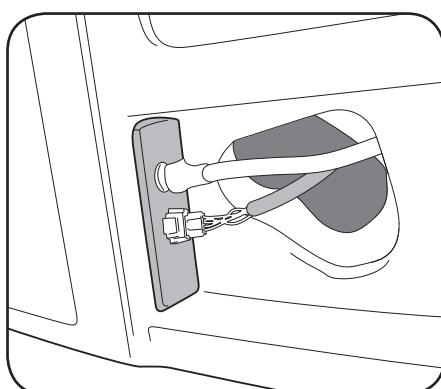

【左側】

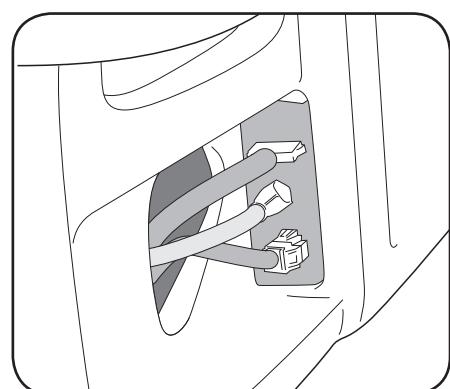


アームレストの取り外し方

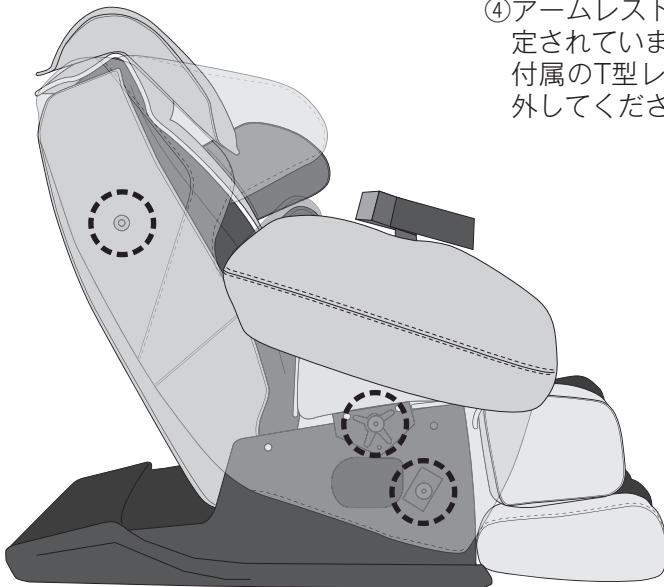

④アームレストはアームレスト取り付けネジで3箇所固定されています。
付属のT型レンチで、アームレストの取り付けネジを外してください。

⑤アームレストを本体から取り外します。

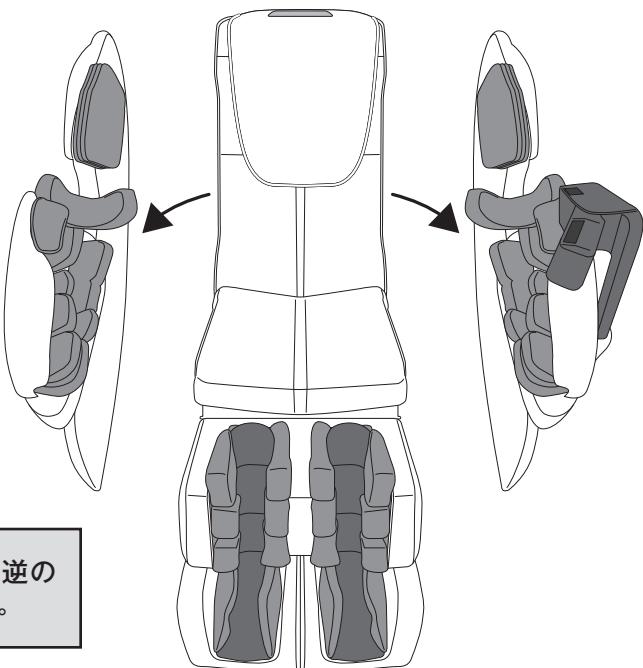

※取り付けの際は、本手順と逆の手順でおこなってください。

⚠ 注意


- アームレストの取り外し、取り付けを行う前に主電源スイッチが「切」になっていることを確認して、電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて作業してください。
→電源コード、アース線を破損し、火災や感電の原因になります。
- アームレストの取り外し、取り付けをおこなうときは本体とアームレストとの間に手や指をはさまないように注意してください。
- 取り付けの際、コネクタは確実に最後まで差し込んでください。また、取り付けネジもしっかりとしめてください。
→故障の原因になります。
- 重量物ですので作業時は、ケガ等しないように作業用手袋を装着してください。
- イラストは右側を説明していますが、左側も同様に作業してください。

フットレストの取り外し方


本手順は、通常の方法で搬入／移動ができない場合のみ、おこなってください。

フットレストカバーの取り外し方

- ①座面を持ち上げます。フットレストカバーの上端と本体のファスナーを開けます。

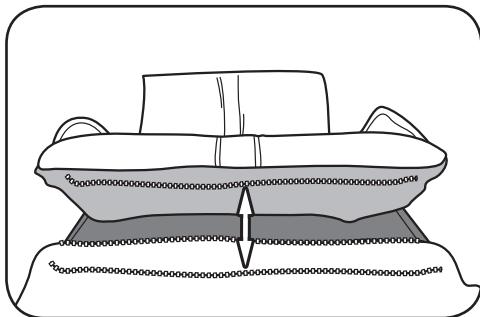


- ②フットレストカバー表面のファスナーと座面(裏側)のファスナーを開けます。

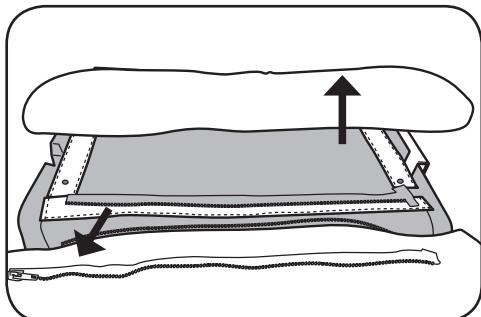




フットレスト支点の取り外し方法

- ③付属のT型レンチで取り付けネジを外します。ネジを外すと、フットレスト支点軸受けが取れます。左右ありますので、確認してから作業してください。

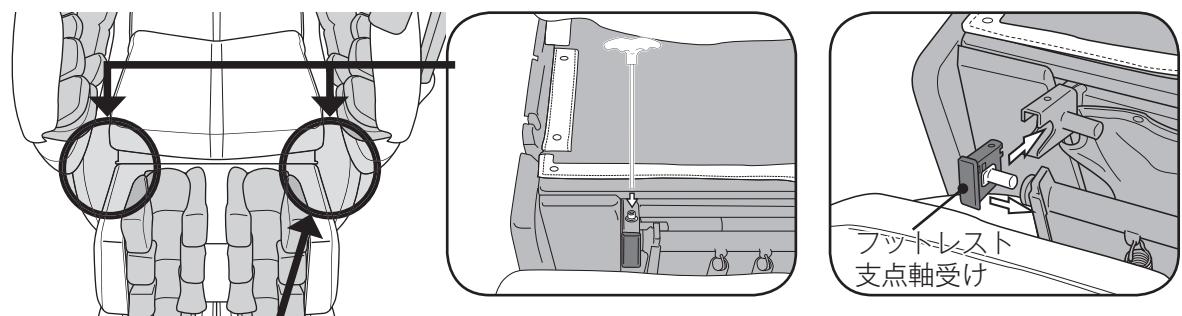

コネクタ・エアホースの取り外し方法

- ④フットレストコネクタカバーを付属のT型レンチで取り外します。

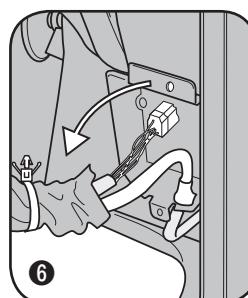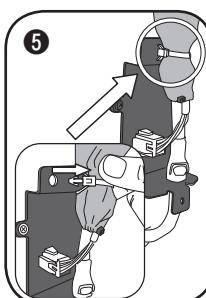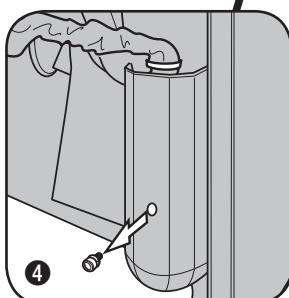

- ⑤プッシュマウントを取り外します。
⑥エアホースとコネクタを取り外します。

ホースを無理に引っ張らないように注意してください。

※取り付けの際は、本手順と逆の手順でおこなってください。









※プッシュマウントを取り付ける際は、取り付け穴を間違えないようにご注意ください。

注意

- フットレストの取り外し、取り付けを行う前に主電源スイッチが「切」になっていることを確認して、電源コード、アース線をコンセントからはずし、電源コードのコネクタもインレットから抜いて作業してください。
→電源コード、アース線を破損し、火災や感電の原因になります。
- フットレストの取り外し、取り付けを行うときは本体とフットレストとの間に手や指をはさまないように注意してください。
- コネクタは確実に最後まで差し込んでください。また、取り付けネジもしっかりとしめてください。
→事故やケガ、故障の原因になります。

設置後確認項目

開梱と設置作業を行った後の最終確認項目です。確認した項目にチェックをしてください。

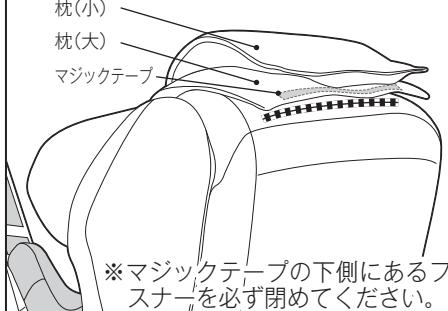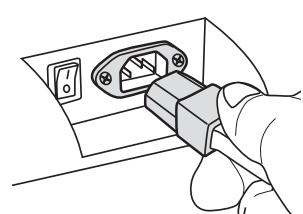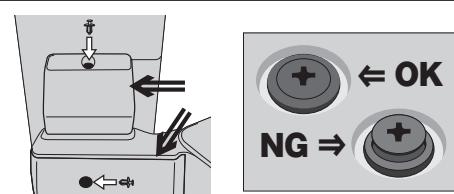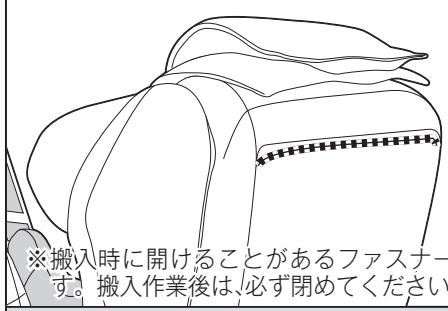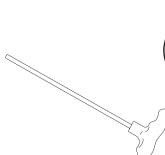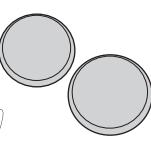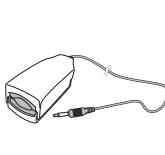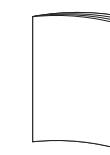1. 背パッド上ファスナーの閉まり	チェック欄	4. インレットとコンセントの差し込み状態	チェック欄										
 <p>※マジックテープの下側にあるファスナーを必ず閉めてください。</p>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>										
2. 背パッド 右側・左側 ファスナーの閉まり	チェック欄	5. タブレットスタンドカバーのプッシュターンリベットの状態	チェック欄										
	右 <input type="checkbox"/> 左 <input type="checkbox"/>	 <p>①タブレットスタンドカバーとタブレットカバーの浮きがないかを確認します。 ②プッシュターンリベットの浮きを確認します。</p>	カバー <input type="checkbox"/> リベット <input type="checkbox"/>										
3. 背もたれ裏側 ファスナーの閉まり	チェック欄	6. タブレット動作の確認(画面と音声)	チェック欄										
 <p>※搬入時に開けることがあるファスナーです。搬入作業後は、必ず閉めてください。</p>	<input type="checkbox"/>	 <p>①タブレットの液晶画面が表示されることを確認します。 ②タブレットにある電源ボタンをOFFにし、「電源ボタンを入れてください」のメッセージ音を確認します。</p>	画面 <input type="checkbox"/> 音声 <input type="checkbox"/>										
7. 設置後の付属品の確認	設置後に下記の同梱物があることを確認してください。												
T型レンチ	指圧パッド	イヤホン	脈拍センサー	取扱説明書	設置説明書	オーナーズカード							
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがあります。(タブレット画面のデザインを含む)													