


MEDICALCHAIR S-Body

ファミリー メディカルチェア エスボディ

搬入に必要な通路幅は？

最小幅 約 60cm

開梱時寸法

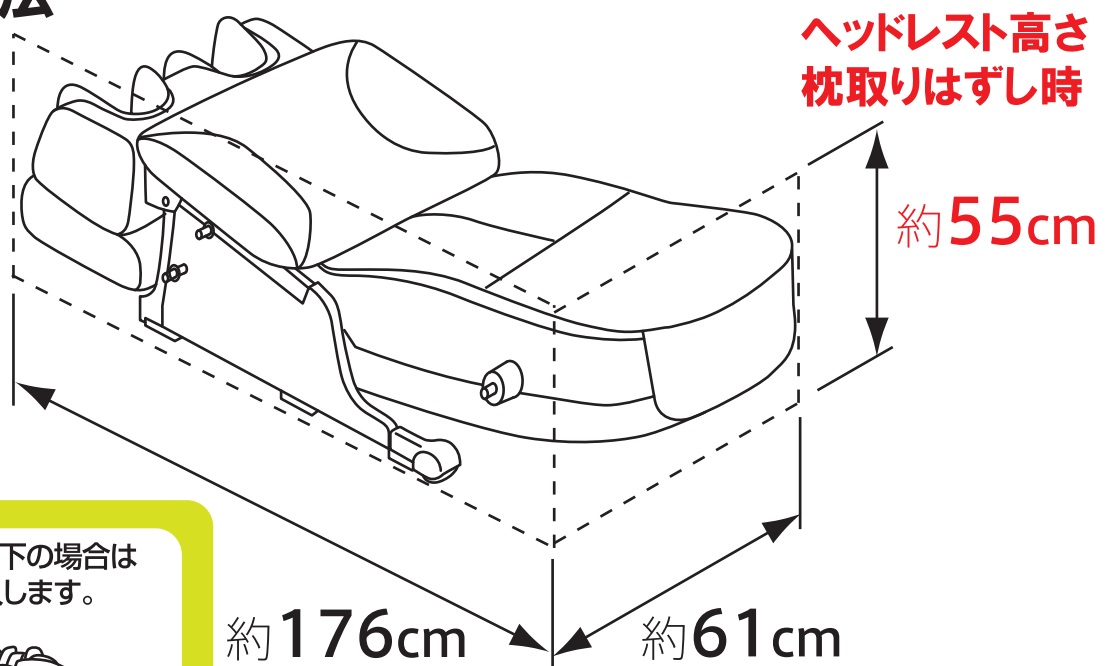


通路幅が65cm以下の場合
本体を縦にして搬入します。



フットレストが
固定されていません。
ご注意ください。

右の図の丸で囲んでいる
箇所を持って持ち上げます。

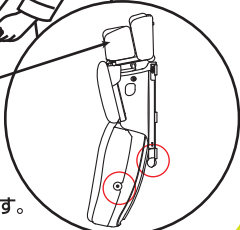

ヘッドレスト高さ 養生
約55cm + 約5cm = 通路最小幅
約60cm

※アームレストは搬入後の取り付けとなります。

※梱包状態・・・幅109cm、奥行き177cm、高さ67cm、重さ97kg